



Beauty tech

Használati útmutató

IPS Arckezelő készülék

-
- Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a szépségápolási eszközt.
 - Kérjük, hogy a jelen könyvben található irányelvek szerint használja, és legyen tisztában a felsorolt biztonsági információkkal. Tartsa meg ezt a könyvet a későbbi használatra
-
- A készülék használata a rutinszerű bőrápolás biztosítását feltételezi. Az orvosi célú felhasználás és értékesítés bármely más módja nem támogatott
-

IPS Arckezelő készülék

Köszönjük, hogy megvásárolta az IPS Arckezelő készüléket.

A fizioterápiás elveken alapuló készülék egy kiváló és hordozható készülék, amely a szépségiparban széles körben elismert három hatékony technikát tartalmaz: fényterápia, ultrahang és ion (galván).

Segítségével a fizikai energiákat használhatja a bőrsejtek vitalitásának elősegítésére, a test keringésének felgyorsítására, valamint a kollagén és az oxigénellátás képességének erősítésére, az anyagcsere javítására, a pattanások és a foltok csökkentésére, hogy a bőr visszanyerje hibátlan és fiatalos állapotát.

Az IPS Arckezelő készülék otthoni használata segíti

- mélyreható bőrtisztítás;
- hidratálás és ránctalanítás;
- feszesítés és felhúzás;
- duzzanat csökkentés;
- akne megszüntetése;
- foltok halványítása;
- a szemtáskák és sötét karikák eltávolítása.

Az IPS Arckezelő készülék készlete a következőket tartalmazza:

1. Készülék (1)
2. Felhasználói kézikönyv (magyar nyelv).
3. USB töltőkábel (1)
4. Asztali tartó (egyben töltő is) (1)
5. Védőszemüveg (1)

Tartalom

1. Biztonsági és karbantartási óvintézkedések
2. Alkatrészek bemutatása
3. Fotonikus és ultrahangos öregedésgátló készülék
4. Célzott problémák.
5. A gép működési elvei
6. Az ultrahangos készülék bevezetése
7. A fényterápia bevezetése
8. Az ionos ápolás bevezetése
9. A kezelés megkezdése
10. Az allergiás bőr vizsgálatának egyszerű módjai
11. Napi ápolás
12. A problémás bőr speciális ápolása
13. Foltok halványítása, bőrfelszín világosítása
14. Érzékeny bőrre
15. Használat után

Műszaki adatok

Bemeneti teljesítmény:	AC 100V - 240V
Kimeneti teljesítmény:	V.E: 1000 mA
Méreték (cm):	170*46*50mm
Súly (g):	139
Ultrahangfej átmérője (mm):	28
Ultrahang frekvencia:	3MHz ± 5%

Biztonsági utasítások

Ezt a készüléket rutinszerű bőrápolásra tervezték. Más célú használata nem támogatott.

Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet.

Kövesse az irányelveket a használat során, és ellenőrizze a használat gyakoriságát a jelen kézikönyv utasításai szerint.

Kérjük, az első használat során rövidítse le a működési időt, ha bőre nagyon érzékeny.

Hagyja abba a használatot, ha bármilyen kellemetlen érzést érez és forduljon orvosához.


Ne használja ezt a készüléket

Orvosi gépekkel, mint például szívritmus-szabályozóval, oxigénkészülékkel, elektrokardiográffal, stb. egyidejűleg

Az alábbi esetek bármelyikében:

- Terhesség vagy menstruáció alatt
- Allergiás bőrgyulladás vagy vérzés esetén
- Irritált bőrön vagy napégés okozta bőrpírnál
- Bőrfekélyen vagy gyulladásokon
- Kozmetikai műtéttel operált testrészeken
- Telangiektázia vagy a szteroid és hosszú távú hormonkezelés által okozott májműködési zavarok esetén

⚠ Üzemeltetési és karbantartási óvintézkedések

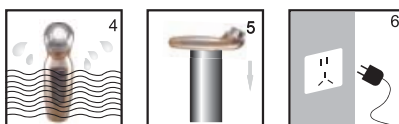

- Ne szerelje szét a készüléket
- Tartsa távol a gyermekektől
- Tűztől távol tartandó
- Tartsa távol a nedvességtől és a víztől.
- Óvja meg a leeséstől
- Feltöltés után húzza ki az áramkábel

A készülék részei


Rozsdamentes kezelőfej
3 MHz ultrahang és ion

Fotonikus masszázsfej

Töltő állvány



Csík -elektroda

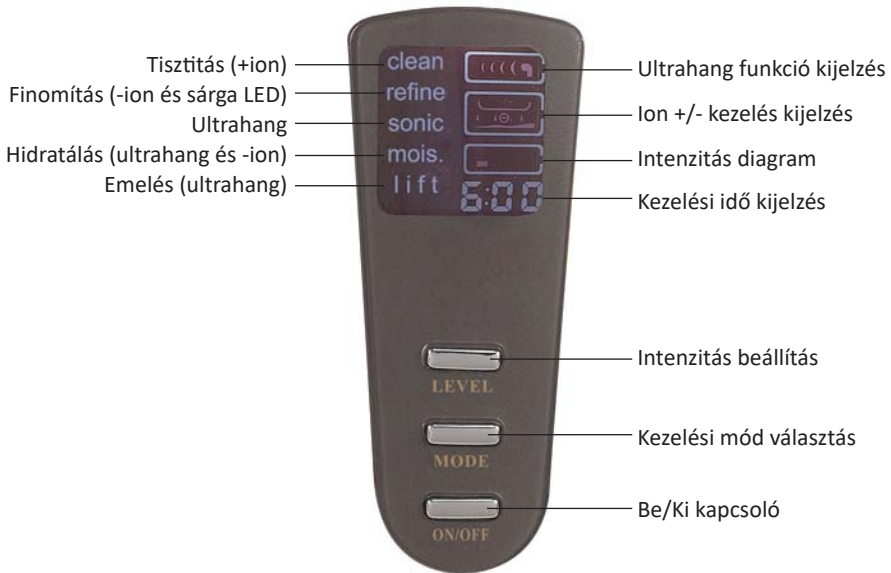

Kezelési mód kiválasztása

Kapcsolja be a készüléket (ON/OFF gomb)

Nyomja meg a MODE gombot:

- Egyszeri nyomás: Tisztítás (3 perc visszaszámlálás)
- Két nyomás: Finomítás (5 perc visszaszámlálás)
- Harmadik nyomás: Ultrahang kezelés (6 perc visszaszámlálás)
- Negyedik megnyomás: Hidratálás (6 perc visszaszámlálás)
- Ötödik nyomás: Emelés (9 perc visszaszámlálás)

Ha nem történik semmilyen művelet, akkor a bekapcsolt készülék 30 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Amikor az egyes üzemmódok visszaszámlálási ideje lejár, a kijelző képernyő visszatér a kezdeti felületre.

Nyomja meg újra a MODE gombot az üzemmód választáshoz.

A kijelzőn a következők jelzik a kiválasztott üzemmódot:

- (1) Az üzemmódot aláhúzás jelzi.
- (2) A jobb oldalon a megfelelő diagram látható.
- (3) Az intenzitási szint mutatja a beállított értéket
- (4) A képernyőn megjelenik a javasolt használati idő.

Töltési utasítás



1. Az első használat előtt tölts fel a készüléket. Körülbelül 3 órán keresztül hagyja a töltőn.
2. A készülék töltése hasonló a mobiltelefonokéhoz. A töltési folyamat során a képernyőn megjelenő akkumulátor ikonról ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét. Ha a készülék teljesen feltöltődött, az akkumulátor ikon eltűnik.
3. Ha az áramellátás alacsony, a képernyő villogni fog, így a képernyőn lévő akkumulátor ikon is, hangjelzésekkel kísérvé. Körülbelül 10-szeri villogás után automatikusan kikapcsol.
4. Ha az áramellátás lecsökken, tölts fel minél hamarabb, különben a tartósan alacsony feszültségű állapot károsíthatja az akkumulátort.

Bőrrel kapcsolatos problémák melyek kezelését az IPS Brightening Skin Corrector biztosítja

A bőr megereszkedése, lazasága, ráncok és barázdák

Akne és bőrgyulladás

Foltok és színeltérések

Tompa bőrtónus

Öregedő bőr, lassú anyagcsere, alacsony tápanyag-fellevő képesség.

Sötét karikák

Az IPS Brightening Skin Corrector működési elvei

Az ultrahang funkció ismertetése

Az IPS Brightening Skin Corrector 3M Hz ultrahanggal rendelkezik, amely a szépségiparban elismert leghatékonyabb és legbiztonságosabb ultrahangos frekvencia. Enyhén behatolhat a bőrbe a sejtmasszázs és a vérkeringés javítása érdekében.

Az ultrahang által kiváltott nagysebességű mikrovibráció megfelelő stimulációt ad a bőrsejteknek, segít a sejtek anyagcseréjének erősítésében, és belülről aktiválja a bőr vitalitását.

A fényterápia ismertetése

Sárga fény

A sárga foton javítja a nyirokrendszert, erősíti az izom- és immunrendszer működését, és eközben növeli a hajszálerek rugalmasságát, enyhíti a bőr irritációját és a tompa bőrtónust, halványítja a foltokat.

Az ionos kezelés ismertetése

A galvanikus, ionos vezetés egy olyan technológia, amely a szépségszalonokban és a kórházakban egyaránt nagy népszerűségnek örvend.

A felületi hámsejtek és a bőr mély sejtjei közötti PH különbség gyenge elektromos mezőt hoz létre a bőr felszíne és mélye között, ami megakadályozza, hogy a tápanyagok a bőr mélyére jussanak.

A galván, ionos működés is elektromos mezőt hoz létre. Amikor a bőr és a készülék elektromos mezői találkoznak, a kezelés hatására oldódik a blokk és az ionizált víz és tápanyagok képesek mélyen a bőrbe jutni.

A pozitív és negatív pólusokkal működő galván és ionos kezelés kivonja a bőr pórusaiból a szennyeződéseket és a zsírt, és a táplálékot mélyen a bőrbe juttatja, sokszoros felszívódási sebességgel, mint kézzel vagy szájon át történhetne.

A pozitív elektróda által kiváltott savas reakció csökkenti a bőr vérellátását, így enyhíti a bőrpírt és az irritációkat. A bőr textúrájának megerősítésével a pórusokat is összezsugoríthatja. Ez teszi nagymértékben alkalmassá az allergiás bőr és a pattanásos bőr kezelésére.


Másrészt a negatív elektróda által kiváltott lúgos reakció serkenti a vérkeringést és lágyítja a bőr textúráját, így fokozza a bőr vitalitását és rugalmasságát, és ezért nagyban segít az öregedő bőr és a szárazság esetén.

A használat megkezdése

Allergia teszt elvégzése

Mielőtt a kezeléshez új kozmetikai hatóanyagot is alkalmazna, az első használat előtt végezzen allergia tesztet. Kenjen kevés krémet az alkarjára.

Ha allergiás tünetek jelentkeznek, hagyja abba a krém használatát, és szükség esetén forduljon orvosához.

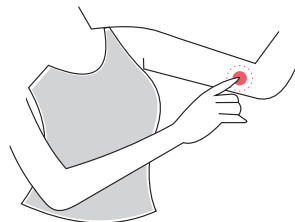


A használat előtt

Az ultrahang működésének ellenőrzéséhez fektesse az ultrahang fejet felfelé, vízszintes helyzetbe. Cseppentsen egy csepp vizet a fejre, és nyomja meg a "Sonic" gombot. A vízcsepp rezegni fog, amikor az ultrahang be van kapcsolva.

Kezelési tippek

A kezelőfej teljes felületén érintkezzen a bőrével.

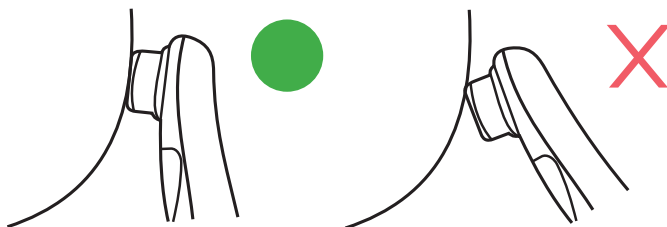

A kezeléshez mindig használjon ultrahang gélt. Ha úgy érzi, hogy a szonda nem csúszik könnyedén, további géltre lehet szükség. (A gél javasolt adagja egyszerre 4-5 g (kávéskanálnyi).


A működéshez a készülék oldalán található csík elektródákat mindkét oldalon érinteni kell. Enélkül a kezelés nem indul el.

Rendszeres használat

A rendszeres arcápolás során a használat nem haladhatja meg a heti három alkalmat. Az egyes használati alkalom ne haladja meg a 30 percet.


Mélytisztítás lépései

1. Távolítsa el a sminket és tisztítsa meg az arcát.
2. Helyezzen vattakorongot a rozsdamentes acélszondára.
3. Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a MODE gombot a CLEAN (TISZTÍTÁS) kiválasztásához.
4. Nyomja meg a LEVEL gombot a megfelelő intenzitási szint kiválasztásához.
5. Masszírozzon az alábbi kép szerint.
Először az állcsúctól a fülig simítson a készülékkel, kb 5 másodperc alatt.
Ezután egyre feljebb haladjon, mindig a középvonaltól kifelé.
6. A kezelés végén tisztítsa meg az arcát
7. Törölje tisztára a készüléket

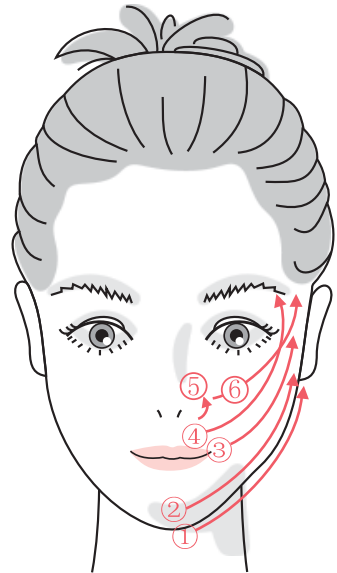


Nyirokkeringés javítás - méregtelenítés lépései

1. Az arcára és a kezelőfejre is kenjen gél.
2. Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a MODE gombot a SONIC/ Ultrahang kiválasztásához.
3. Nyomja meg a LEVEL gombot a megfelelő intenzitási szint kiválasztásához
4. Mozgassa a kezelőfejet lassú modulatokkal az alábbi vonalakkal jelzett lépésekben és irányokban.

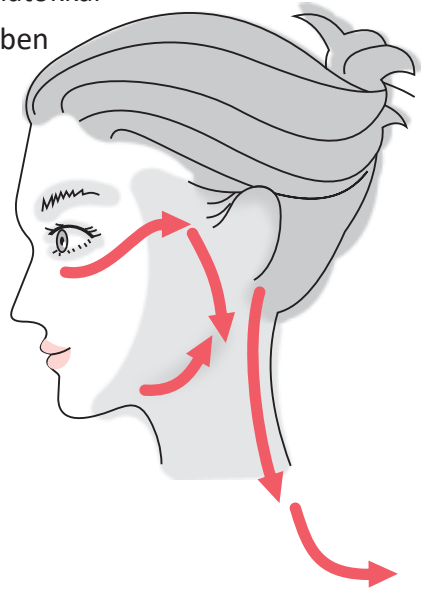


Tápanyag bőrbe juttatás és emelő hatás


1. Kenje a bőrápoló terméket az arcára és hagyja kissé beszívódni.
2. Tegyen ultrahang gélt a kezelőfejre.
3. Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a MODE gombot a MOIS. vagy LIFT funkció kiválasztásához.
4. Nyomja meg a LEVEL gombot a megfelelő intenzitási szint kiválasztásához.
5. Mozgassa a kezelőfejet lassú modulatokkal a szemközti oldalon jelzett lépésekben és irányokban.
6. A mozgatás lassú legyen, egy-egy irányban kb 5 másodpercig tartson.

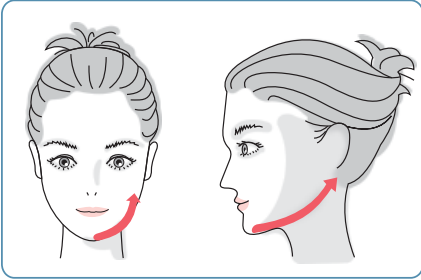


1., Állcsúcstól a fülcimpa irányába

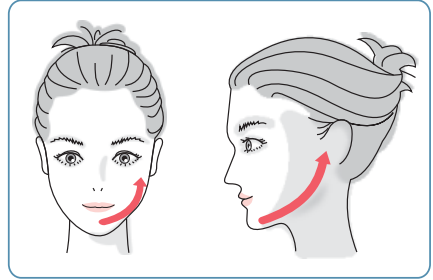


2., Állcsúcstól a hallójárat elé

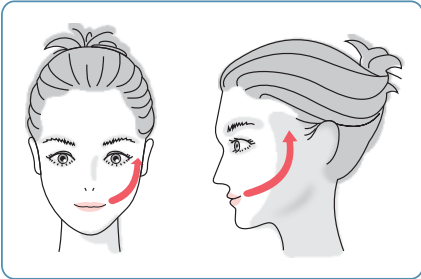


3., Szájzugtól a fül fölé

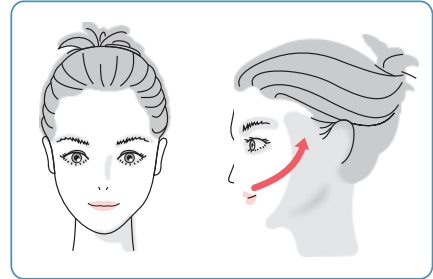

4., Orrgyöktől a szemöldök külső széléig

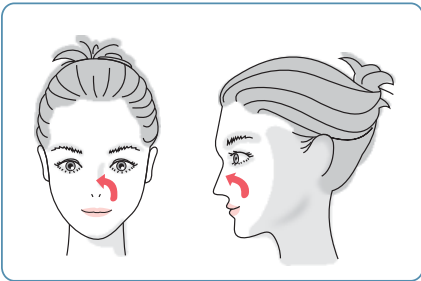

5., Orrszárnyak

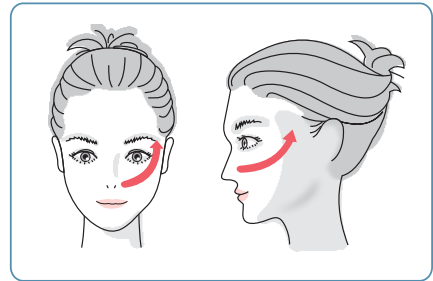

6., Orrtól a halántékig

Problémás bőr kezelése

1. lépés: A foltok halványítása, a bőrtónus korrigálása.
2. lépés: A bőr tápanyag ellátás javítása
 - Kenjen folthalványító hatású összetevőket tartalmazó bőrpolót a foltokra
 - Tegyen kevés ultrahang gélt a szondára.
 - Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg a MODE gombot a RE-FINE (Finomítás) kiválasztásához.
 - A szondával masszírozza át a foltokat és a közvetlen környezetüket. 20-30 másodpercig minden egyes pozícióban.

Érzékeny bőr kezelése (hetente 1-3 alkalommal)

- Válassza a SONIC vagy LIFT funkciót, a napi ápolással megegyező lépéseket követve.
- Érzékeny bőr esetén ne használjon ion módot.
- A kezelés után soha ne feledkezzen meg a bőre hidratálásáról.

Használat után

- Használat után kapcsolja ki a készüléket.
- A kezelőfejet óvatosan törölje le nedves kendővel.
- Ne mártsa vízbe és ne használjon semmilyen kémiai tisztítószeret.
- Tárolja a készüléket tisztán és szárazon.