



Használati útmutató

SaltDome ultrahangos sóterápiás készülékhez

Megfelelőségi nyilatkozat:

Az eszközt az ISO 9001 szabvány szerint tanúsított menedzsment rendszer szerint gyártották és ellenőrizték, és a megállapított specifikáció minden szempontjának megfelel az európai követelményeknek.

Gyártó: J&R Electronics Co, Kína

Műszaki támogatás: Scart Kft Tel: +36 53 200108 www.medimarket.hu



Gratulálunk a SaltDome ultrahangos sóterápiás készülék megvásárlásához!

A SaltDome készüléket otthoni használatra tervezték. Ultrahangos részecske porlasztója ultrahangos rezgés segítségével a sóoldatot 1-5 mikron méretű sórészecskékké alakítja át. Ezek a részecskék képesek mélyen behatolni a tüdőbe, a tüdőhólyagokba, és segítik a váladék eltávolítását, a baktériumok, a vírusok és a gombák elleni védekezést, a gyulladás csökkentését, a véráram oxigénellátásának javítását és a légutak nedvesítését.

A sóterápiát sikeresen alkalmazzák krónikus és akut légúti betegségek kezelésében és megelőzésében. Segít csökkenteni a gyulladást, oldani az elzáródásokat, tisztítani a légzőrendszert és javítja a légzést. Emellett megelőzi a légúti betegségek kialakulását, véd a nátha és az influenza ellen azáltal, hogy fenntartja a teljes légzőrendszer általános higiéniáját.


A SaltDome gondoskodik a sós levegőről és a negatív ionokról, melyek nem csak a légzési rendszert érintő állapotokat javítja, de jótékonyan hat a munkavégzés hatékonyságára és az összpontosításra is.

A SaltDome sóterápiás készülék hálózati adapterrel, használati útmutatóval, keverőpohárral kerül szállításra. Opcionálisan rendelhető parajdi vagy himalájai természetes kősó.

Ez az eszköz könnyen használható. Csak csatlakoztassa a hálózathoz, töltsse fel a tartályt, és éjszaka használja. A készüléket az ágya közelében, a testével egy magasságban az éjjeliszekrényen helyezze el és élvezze a természetes só csodálatos hatását.

A SaltDome készülék nagyon csendes és nem zavarja az alvását. A legjobb eredmény elérése érdekében rendszeres, tartós alkalmazást javasolunk.

Készülék részletek

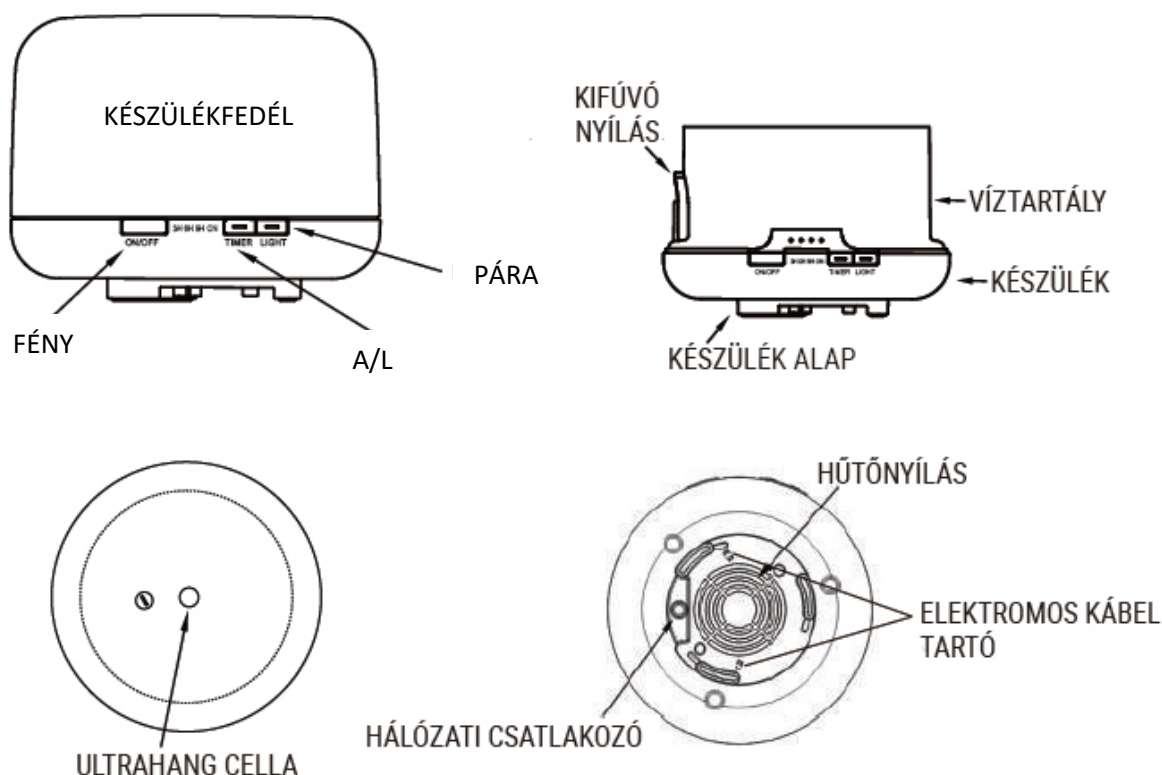

Használat

- Helyezze a készüléket egy vízszintes, stabil és száraz felületre, ahol azt használni fogja (éjjeliszekrény) és emelje le a felső burkolatot. **1. ábra (FIG1)** A készülék alatt ne legyen terítő vagy más textil, mert elzárhatja a levegőnyílást.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert az eszköz alján lévő aljzathoz. **2. ábra (FIG2)**
- Használja a mellékelt mérőpoharat, és töltsön 1-3 pohárnyi vizet a víztartályba (legfeljebb 300 ml) **3. ábra (FIG3)**
- Ezután oldjon fel 1/2 adagolókanányi kősót (NE TÖBBET!) a 4. mérőpohárnyi vízben. Öntse ezt a sóoldatot a víztartályba, amely így megtelik. A vízszint ne haladja meg a Max szintet. **5. ábra (FIG5)**
Ha a vízszlop túl magas, az ultrahang cella nem képes párát előállítani, így nem fogja a tartályból a víz.
- Normális, ha a só oldódása után szennyeződést lát a tartály fenekén. A kősó természetes és finomítatlan. Nem jelent veszélyt Önre!
SOHA ne töltsön vizet már bekapcsolt készülékbe!
Ha a csapvíz kemény vagy klórt tartalmaz, akkor használjon lágyított vagy palackozott vizet. **4. ábra (FIG4)**
- Általában elegendő az 1/2 kanál kősó feloldása. Erős panaszok esetén növelhető némiképp a só mennyisége, de a teljes tartályra vonatkozóan se haladja meg az egy adagolókanányi mennyiséget. Gyógyhatás szempontjából nem szükséges több só, hanem inkább a sós levegőn töltött időt növelje!
- Törölje szárazra a víztartályt papírtörülővel. Helyezze a felső fedelet a helyére
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a fali aljzatba. **6. ábra (FIG6)**
- Bekapcsoláshoz nyomja meg a PÁRA gombot. **9. ábra (FIG9)**
A készülék csak akkor kapcsol be, ha a tartályban van víz. A bekapcsolt állapotot jelző „1 óra” LED világít, és az eszköz elkezd a működést.
A mikroszkopikus só részecskék a felső nyíláson keresztül jutnak ki az eszközből.
Legfeljebb enyhe pára látható, és ez normális! Csak igen kevés pára áramlik ki a készülékből.
- A PÁRA gomb ismételt megnyomásával beállíthatja az időzítést. A beállítható idő 1 óra, 3 óra, 6 óra. A beállított időtartam után a készülék automatikusan kikapcsol.
A PÁRA gomb újabb megnyomására a LED fény a BE állásba áll. Ebben a helyzetben a készülék folyamatosan működik, csak a tartály kifogyása esetén áll le.
A PÁRA gomb ismételt megnyomására a készülék kikapcsol.
- A/M (Alacsony/Magas pára kibocsátás) – az A/M gombbal csökkentheti/növelheti a kibocsátott páramennyiséget. A változás szabad szemmel alig észlelhető. A két mód között a pára kibocsátásban mintegy 20-25% eltérés van. **8. ábra (FIG8)**
- FÉNY – a gomb megnyomásával bekapcsol a készülékbe épített LED és folyamatosan, néhány másodpercenként váltja a színét. Ha egy szín tetszik, akkor nyomja meg ismét a gombot és ezzel állandóra állítja be.
A FÉNY gomb ismételt megnyomásával továbbléphet a színek között. Végül a fény kikapcsolható. **7. ábra (FIG7)**

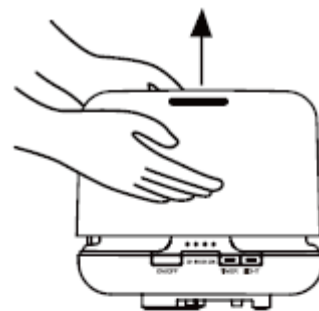


Fig 1

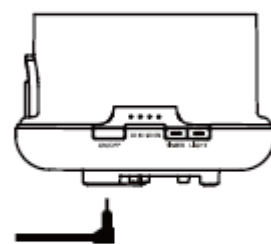


Fig 2

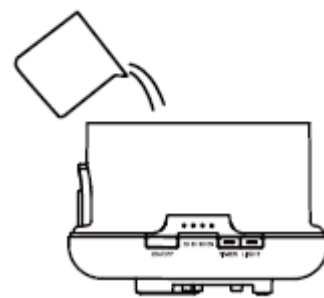


Fig 3



Fig 4

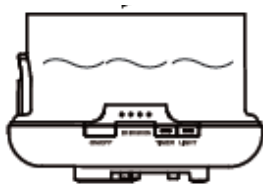


Fig 5

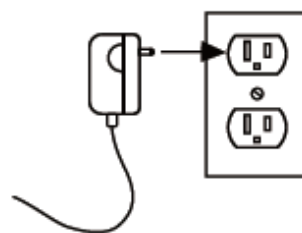


Fig 6



Fig 7



Fig 8

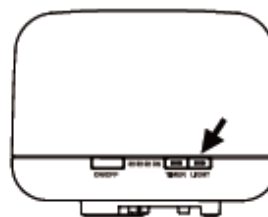


Fig 9

Ha hosszabb ideig használaton kívül van az eszköz, öntse ki a vizet és tegye az eszközt száraz helyre.

A készülék automatikusan leáll, ha a tartályban nincs több sóoldat. A víztartály körülbelül 5-9 éjszaka alatt fogy ki. A használat folytatásához töltsse fel a tartályt ismét sóoldattal.

Ha készüléket feltöltötte, akkor már ne döntse meg vagy mozgassa az egységet, és ne távolítsa el a felső burkolatot.

Ha a víztartályban nincs víz, akkor az ON / OFF megnyomásakor a készülék sípolással emlékezteti Önt a víz hozzáadás szükségességére.

A készülék víz nélkül nem működik.

Távirányító

A készülék távirányítóval is működtethető.

ON/OFF = BE/KI

IDŐZÍTÉS

PÁRA MENNYISÉG



SZAKASZOS
FOLYAMATOS
MŰKÖDÉS

FÉNY

Karbantartás és Tisztítás

2-3 használatot követően az alábbiak szerint tisztítsa meg az eszközt:

1. Válassza le a készüléket a hálózatról és távolítsa el a burkolatot.
2. A megmaradt vizet a "DRAIN SIDE", azaz a tartály leeresztő oldalán öntse ki.
3. Egy pohár langyos vízben feloldott citromsavval és egy puha ronggyal tisztítsa meg az eszközt, és papírtörülővel törölje szárazra (vízkőmentesítés).
4. Finoman tisztítsa meg az ultrahang cellát (apró kerek mélyedés a víztartály alján) puha ruhával.
5. Soha ne használjon más savakat, enzimeket vagy mosószereket, mert mérgező gáz keletkezhet, vagy hibás működés léphet fel.
6. A víztartályon belül van egy belső fedél is, amelyet tisztításhoz is le lehet venni. Keresse meg a markolatot, és húzza ki a belső burkolatot.
A tisztítás után először helyezze be a légkiömlő nyílást, majd nyomja meg a markolat oldalán, amíg meg nem hallja a kattantást.
7. Tároláshoz az eszközt alaposan tisztítsa meg, az utasítások szerint. Ha megszáradt, tegye vissza eredeti csomagolásába és hűvös, száraz helyen tárolja.

NAGYON FONTOS:

Az ultrahang cella tisztításához csak puha ruhát használjon. Soha ne érintse meg éles vagy kemény tárggyal.

SOHA ne merítse a készülék alapot vízbe, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz belsejébe a LEVEGŐ vagy az egyéb nyílásokon sem.

Feltöltés után már NE mozgassa az eszközt egyik helyről a másikra. Mindig vegye le a fedelet és ürítse ki a víztartályt, mielőtt áthelyezné egy másik helyre.

Szállítási és tárolási körülmények: -20°C - 55°C, páratartalom ≤95%, nyomás 70-106 kPa.

Üzemelési körülmények: 5- 40°C, páratartalom 30-80%, nyomás 80kPa - 106kPa.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség: 24V

Teljesítmény: 13W

Párásítás módja: 2.4Mhz ultrahang cella

Víztartály kapacitása: 500ml

Zajszint: <35dB

Adapter: Input 100-240V~ 50/60Hz

Vízállóság: IPX0

Készülék méretek: 168x121mm

Készülék súly: kb 520 gr.

Óvintézkedések

Kérjük, hogy az alábbiakat olvassa el és tartsa be:

- A készüléket mindig stabil, vízszintes és sima felületen tartsa. Ne tegyen alá párnát, terítőt, mert ez elzárja az alul levő szellőzőnyílásokat, a készülék túlmelegszik és tönkremegy.
- Soha ne töltsön vizet a "MAX" jelzés fölé.
- Ne adjon a vízhez több sót, mint amennyit javasoltunk.
- Természetes és adalékmentes kősót használjon, például Parajdi vagy Himalájai kősó.
- Ne használjon tengeri sót, jódot vagy másmilyen adalékot tartalmazó sót!
- Ha a tartály üres, ne kapcsolja be az eszközt.
- A karbantartási utasítások szerint eljárva, rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy megelőzze a meghibásodását.
- Karbantartás előtt mindig válassza le a tápellátásról.
- Használatot követően a megmaradt vizet a "DRAIN SIDE", azaz a tartály leeresztő oldalán öntse ki, és egy tiszta, száraz ruhával törölje szárazra az eszközt.
- Tartsa távol közvetlen napfénytől, hőforrástól és légkondicionálótól.
- Ne döntse meg az eszközt, mert a víz bekerülhet az aljába és meghibásodást okozhat.
- Egyszerre ne használja 10 óránál hosszabb ideig. Újraindítás előtt várjon 60 percet, hogy elkerülje az ultrahangos cella károsodását.
- Aromaterápiához csak 100%-ban természetes illóolaj használható. A kémiai illatanyagok, fűszerek vagy szennyeződések hibás működést okoznak. Egyszerre 3-5 cseppet használjon 100ML vízhez. A túl sok olaj eltömíti a rendszert és hibás működést okoz. Kérjük, tisztítsa meg a készüléket a karbantartási utasításoknak megfelelően, mielőtt új típusú illóolaj használatára váltana.
- Csak csapvizet és palackozott vizet használjon, ne használjon ásványvizet, szénsavas vizet, Salvus vizet vagy gyógyvizet, mert a készülék károsodásához vezethet.
- Használat közben ne mozgassa az eszközt.
- Nedves kézzel soha ne érintse a termék egyetlen részét sem.
- Gyermekektől és kisállatoktól tartsa távol.
- A kábel ne keresztezzon haladási útvonalakat és soha ne alkalmazzon erős húzó hatást egyetlen pontján sem.
- Ha égett szagot érez, azonnal válassza le a hálózatról.

Hibaelhárítás

Ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat:

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
Nem kapcsol be – korán kikapcsol	<ul style="list-style-type: none"> • Van elég víz a tartályban? • A tápkábel csatlakoztatása megfelelő? 	<ul style="list-style-type: none"> • Töltsön vizet a tartályba • Válassza le, ellenőrizze a kábeleket, majd csatlakoztassa ismét körültekintően.
Nincs pára, vagy abnormális a pára	<ul style="list-style-type: none"> • Nincs elég víz • Túl sok a víz • Beszennyeződött az ultrahangos cella? • A burkolat és a belső burkolat felhelyezése nem megfelelő? • Az eszköz alján lévő levegő beszívó nyílás valamiért eltömődött? 	<ul style="list-style-type: none"> • Töltsön megfelelő mennyiségű vizet. • A víztartályt sose töltsse a MAX vonal fölé. • Kérjük, ellenőrizze a karbantartási utasításokat az ultrahangos cella megfelelő tisztításához. • Vegye le, majd helyezze vissza megfelelően, hogy a pára képződése akadálytalan legyen. • Tisztítsa meg vagy szabadítsa fel a beszívó nyílást. • A korlátozott légáram hatással van a páráképzésre.
Az eszközből szivárog a víz	<ul style="list-style-type: none"> • A burkolat és a belső burkolat felhelyezése nem megfelelő? • Felborult az eszköz? • Alacsony a hőmérséklet vagy magas a páratartalom? 	<ul style="list-style-type: none"> • Vegye le, majd helyezze vissza megfelelően, hogy a pára képződése akadálytalan legyen. • Kövesse a véletlen kiömlésre vonatkozó utasításokat. • Ilyen körülmények között a pára gyorsan lecsapódik vízcseppek formájában.

Figyelem

A keletkező pára mennyisége és intenzitása változik, de nem tekinthető hibának. A pára mennyiségét befolyásoló tényezők közé tartozik a tartályban levő víz mennyisége, a helyiség páratartalma és hőmérséklete, továbbá a levegő áramlása.

Ha nincs víz a tartályban, a PÁRA gomb megnyomásával a készülék 3 alkalommal "csipog", hogy emlékeztesse Önt a víz hozzáadására. A készülék víz nélkül nem fog működni.

Abban az esetben, ha a készülék használat közben felborul vagy felborul, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a hibás működés elkerülése érdekében.

- Húzza ki a készüléket a hálózathoz és vegye le a fedelet.
- Öntse ki a víztartályból a maradék vizet.
- Óvatosan rázza meg a készüléket, hogy az esetleg a készülékházban lévő víz lefolyjon, majd hagyja száradni legalább 24 órán keresztül.

Forgalmazó: Scart Kft. 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Tel.: +36 53 200108 • iroda@medimarket.hu • www.medimarket.hu