



Návod na použitie

SaltDome na ultrazvukovú soľnú terapiu

Vyhlasenie o zhode:

Prístroj bol vyrobený a overený v súlade so systémom riadenia certifikovaným podľa normy ISO 9001 a spĺňa všetky aspekty dohodnutej špecifikácie podľa európskych požiadaviek.

Výrobca: J&R Electronics Co, Čína

Technická podpora od spoločnosti Scart Kft

Tel: +36 53 200108

www.medimarket.hu



Blahoželáme vám k zakúpeniu ultrazvukového zariadenia na soľnú terapiu SaltDome!

Prístroj na soľnú terapiu SaltDome je určený na domáce použitie. Využíva ultrazvukovú atomizáciu na vytvorenie pary soľného roztoku v zásobníku, ktorý obsahuje častice soli s veľkosťou od 1 do 5 mikrónov. Tieto častice sa môžu dostať do všetkých častí pľúc. Molekuly soli (NaCl) na stenách dýchacích ciest majú osmotický účinok, pomáhajú rozpúšťať sekréty a uľahčujú ich odstraňovanie. Pomáha chrániť pred baktériami, vírusmi a plesňami, zmierňuje zápal a nepriamo zlepšuje okysličenie a zvlhčovanie dýchacích ciest.

Je dokázané, že soľná terapia pomáha predchádzať ochoreniam dýchacích ciest. Určite chráni pred alergiami horných dýchacích ciest, dokonca aj pred prechladnutím a chrípkou (ale nezaručuje, že neochoriete).

Pri chronických ochoreniach dýchacích ciest (CHOCHP, astma, cystická fibróza atď.) sa môže používať ako doplnková liečba k medikamentóznej liečbe.

Pomáha zmierniť alergické príznaky horných dýchacích ciest.


SaltDome poskytuje slaný vzduch a záporné ióny, ktoré nielen zlepšujú stavy ovplyvňujúce dýchací systém, ale sú tiež prospešné pre pracovnú výkonnosť a koncentráciu. Prístroj na soľnú terapiu SaltDome sa dodáva so sieťovým adaptérom, návodom na použitie, miešacím pohárom a dávkovacou lyžičkou. Voliteľne je k dispozícii prírodná kamenná soľ Parajdi alebo himalájska soľ.

Tento nástroj sa ľahko používa. Zapojte ho, naplňte nádrž slaným nálevom a použite ho. Keďže soľná terapia je účinná pri dlhodobom používaní, odporúča sa používať ju v noci počas spánku. Prístroj umiestnite na nočný stolík v blízkosti postele, v rovnakej výške ako je vaše telo, a užívajte si úžasné účinky prírodnej soli. Čím bližšie je zariadenie k vám, tým je účinnejšie - zo zariadenia umiestneného ďalej sa do pľúc dostane menej prospešnej soli.

SaltDome je tichý a neruší spánok väčšiny ľudí. Ak ste citliví na zvuk, mali by ste zariadenie premiestniť ďalej.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame pravidelné a dlhodobé používanie.

Podrobnosti o zariadení

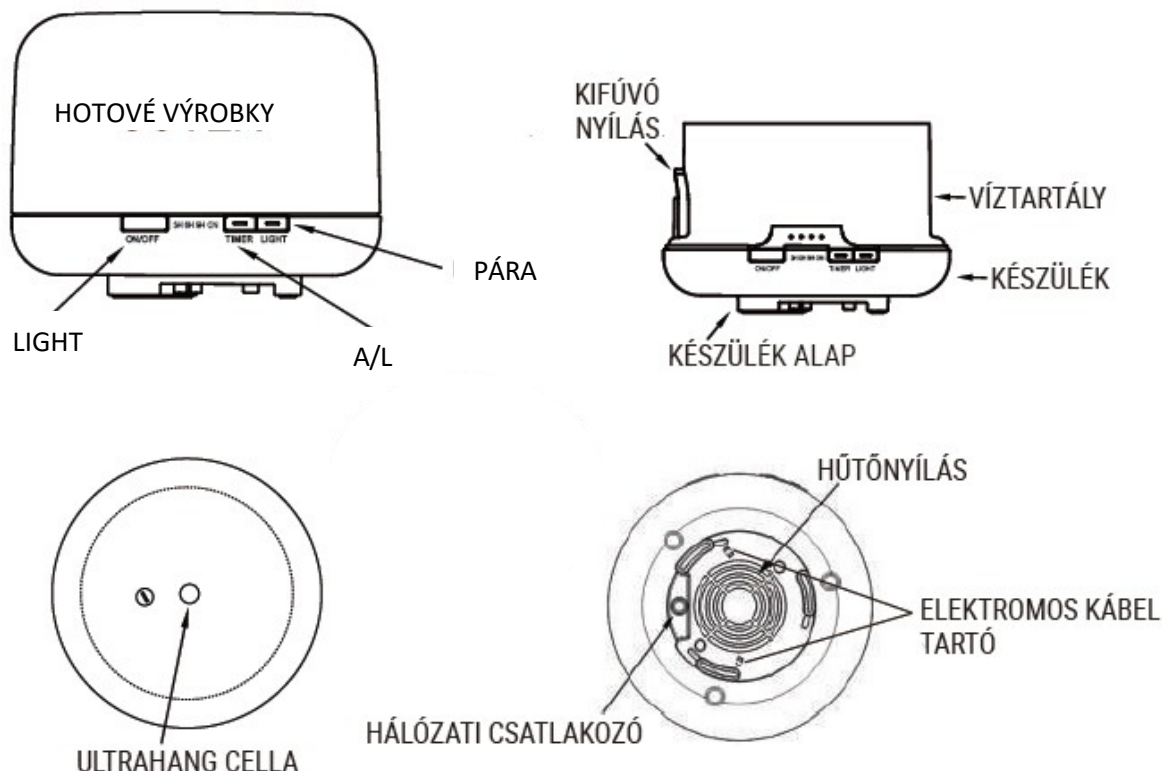

Použitie

1. Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch, na ktorom sa bude používať (nočný stolík), a odklopte horný kryt.

Obr. 1 (FIG1) Pod spotrebič neumiestňujte obrus alebo iný textilný materiál, pretože by mohol zablokovat' vetrací otvor.

2. Zapojte napájací adaptér do zásuvky v spodnej časti zariadenia.

Obrázok 2 (FIG2)

3. V 500 ml (pol litra) vody rozpustíte 1 odmerku (1 gram) kamennej soli (NIE VIAC!) **Obrázok 4 (FIG4)**

4. Pripravený solný roztok nalejte do nádrže na vodu, ktorá sa následne naplní. Hladina vody by nemala prekročiť maximálnu úroveň. **Obrázok 5 (FIG5)**

Ak je vodný stĺpec príliš vysoký, ultrazvuková bunka nie je schopná produkovať vlhkosť, takže voda v nádrži nevyteká.

5. Je normálne, že po rozpustení soli sa na dne nádrže objavia nečistoty. Kamenná soľ je prírodná a nerafinovaná. Nie je pre vás nebezpečná!

Nenapúšťajte vodu do spotrebiča, ktorý je už zapnutý!

Ak je voda z vodovodu tvrdá alebo obsahuje chlór, používajte zmäččenú alebo balenú vodu.

6. Na liečebné účely stačí rozpustiť 1 lyžicu (1 gram) kamennej soli. Viac nie je potrebné! Silnejší účinok sa neočakáva od väčšieho množstva soli, ale od dlhšieho pobytu na slanom vzduchu!

7. Nasadte horný kryt a otočte zásuvku požadovaným smerom.

8. Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky. **Obrázok 6 (FIG6)**

9. Stlačením tlačidla POWER sa zapnete. **Obrázok 9 (FIG9)**

Spotrebič sa zapne len vtedy, ak je v nádrži soľanka. Rozsvieti sa kontrolka "1 hodina" indikujúca zapnutý stav a zariadenie začne pracovať.

Mikroskopické častice soli vychádzajú zo zariadenia cez horný otvor.

Môžete vidieť nanajvýš miernu hmlu, a to je normálne! Zo spotrebiča vychádza veľmi málo hmly.

10. Opätovným stlačením tlačidla POWER nastavíte časovač. Čas môžete nastaviť na 1 hodinu, 3 hodiny, 6 hodín. Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie automaticky vypne.

Opätovným stlačením tlačidla POWER zapnete kontrolku LED. V tejto polohe bude spotrebič pracovať nepretržite a zastaví sa len vtedy, keď je nádrž prázdna.

Opätovným stlačením tlačidla POWER zariadenie vypnete.

11. A/M (nízky/vysoký výstup pary) - pomocou tlačidla A/M znížite/zvýšite množstvo výstupu pary. Zmena je voľným okom sotva badateľná. Rozdiel vo výstupe pary medzi týmito dvoma režimami je približne 20-25 %. **Obrázok 8 (FIG8)**

12. SVETLO - stlačením tlačidla sa zapne LED dióda zabudovaná v zariadení, ktorá každých niekoľko sekúnd plynule mení farbu. Ak sa vám niektorá farba páči, opätovným stlačením tlačidla ju nastavíte na trvalú.

Opätovným stlačením tlačidla LIGHT môžete prechádzať medzi farbami. Nakoniec môžete svetlo vypnúť. **Obrázok 7 (FIG7)**

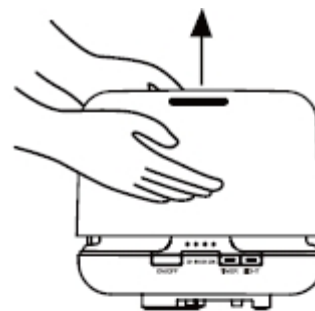


Fig 1

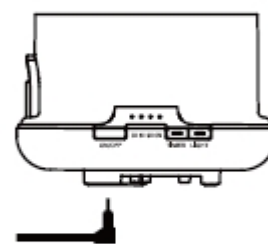


Fig 2

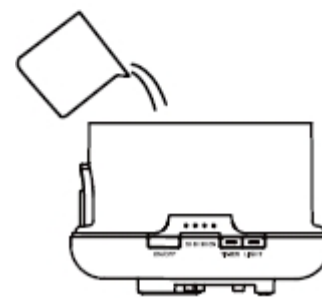


Fig 3



Fig 4

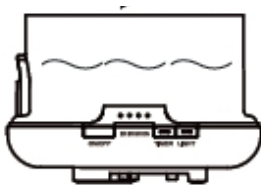


Fig 5

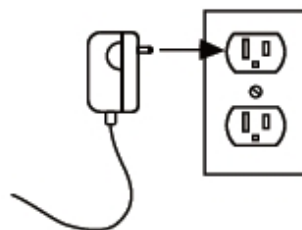


Fig 6



Fig 7

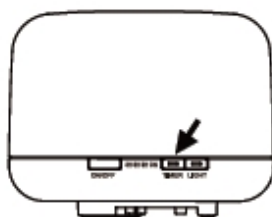


Fig 8

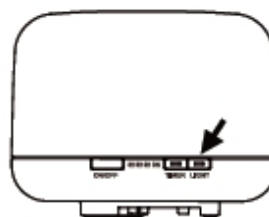


Fig 9

Spotrebič sa automaticky zastaví, keď v nádrži už nie je soľanka. Nádržka na vodu sa vyčerpá približne za 5-9 nocí. Ak chcete pokračovať v používaní, doplňte do nádržky soľanku.

Po nabití jednotky ju nenakláňajte, nehýbte s ňou a neodstraňujte horný kryt.

Ak v nádržke na vodu nie je žiadna voda, stlačením tlačidla ON/OFF sa ozve zvukový signál, ktorý vám pripomenie, aby ste vodu doplnili.

Zariadenie nebude fungovať bez vody.

Používanie prístroja sa odporúča ako liečebná kúra počas najmenej 10-14 dní. Nenechávajte v prístroji vodu, keď ho nepoužívate. Prístroj vyprázdňte a uložte na suchom mieste.

Diaľkové ovládanie

Zariadenie sa dá ovládať aj diaľkovým ovládaním.

ON/OFF = BE/KI

TRANSMISIA

PÁRA KVANTITA



PRERUŠOVA
NÁ
NEPRETRŽITÁ
PREVÁDZKA

LIGHT

Údržba a čistenie

Každých niekoľko dní zariadenie vyčistíte nasledujúcim spôsobom:

1. Odpojte zariadenie od elektrickej siete a odstráňte kryt.
2. Zvyšnú vodu vypustíte na strane, na ktorej sa nachádza nápis "DRAIN SIDE".
3. Prístroj vyčistíte pohárom kyseliny citrónovej rozpustenej vo vlažnej vode a mäkkou handričkou a utrite do sucha papierovou utierkou (odstraňovanie vodného kameňa).
4. Ultrazvukový článok (malá okrúhla priehlbina na dne vodnej nádrže) jemne očistite mäkkou handričkou.
5. Nikdy nepoužívajte iné kyseliny, enzýmy alebo čistiace prostriedky, pretože môžu spôsobiť poruchu.
6. Vo vnútri nádržky na vodu sa nachádza aj vnútorné veko, ktoré možno odňať na čistenie. Nájdite rukoväť a vytiahnite vnútorný kryt. Po čistení najprv zasuňte výstup vzduchu a potom stlačte bočnú časť rukoväte, kým nebudete počuť cvaknutie.
7. Ak chcete zariadenie uskladniť, dôkladne ho vyčistite podľa pokynov. Po vysušení ho vráťte do pôvodného obalu a uložte na chladnom a suchom mieste.

VEĽMI DÔLEŽITÉ:

Na čistenie ultrazvukovej bunky používajte len mäkkú handričku. Nikdy sa ho nedotýkajte ostrým alebo tvrdým predmetom.

NIKDY neponárajte spodnú časť spotrebiča do vody a dávajte pozor, aby sa voda nedostala do AIR alebo iných otvorov.

Po nabití zariadenie NEPREMIESTAJTE z jedného miesta na druhé. Pred premiestnením na iné miesto vždy odstráňte veko a vyprázdňte nádržku na vodu.

Podmienky prepravy a skladovania: -20 °C - 55 °C, vlhkosť ≤95 %, tlak 70-106 kPa.

Prevádzkové podmienky: 5 - 40 °C, vlhkosť 30 - 80 %, tlak 80 kPa - 106 kPa.

Technické údaje

Vstupné napätie: 24 V Výkon: 13 W

Metóda zvlhčovania: 2,4Mhz ultrazvukový

článok Kapacita nádržky na vodu: 500 ml

Hladina hluku: <35 dB

Adaptér: vstup 100-240V~ 50/60Hz

Odolnosť voči vode: IPX0

Rozmery zariadenia: 168x121 mm

Hmotnosť zariadenia: približne 520

gr.

Preventívne opatrenia

Prečítajte si a dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Spotrebič vždy držte na stabilnom, rovnom a rovnom povrchu. Neumiestňujte podň vankúš alebo prikrývku, pretože by to zablokovalo ventilačné otvory pod spotrebičom, čo by spôsobilo jeho prehriatie a poruchu.
- Nikdy nenapĺňajte vodu nad značku "MAX".
- Do vody nepridávajte viac soli, ako sa odporúča. Viac soli neprináša silnejší zdravotný účinok! Pre silnejší účinok strávte v soľnej pare viac času!
- Použitie príliš koncentrovaného soľného roztoku (viac soli, ako sa odporúča) nezvýši účinok, ale povedie k poruche spotrebiča (usadí sa na ventilátore a zabráni jeho otáčaniu).
- Používajte prírodnú kamennú soľ bez prídavných látok, napríklad kamennú soľ Parajdi alebo himalájsku soľ.
- Nepoužívajte morskú soľ, soľ obsahujúcu jód ani žiadne iné prísady!
- Ak je nádrž prázdna, zariadenie nezapínajte.
- Dodržiavajte pokyny na údržbu a pravidelne čistite spotrebič, aby ste zabránili jeho nesprávnej funkcii.
- Pred údržbou vždy odpojte napájanie.
- Po použití vylejte zvyšnú vodu z nádržky "DRAIN SIDE" a zariadenie utrite do sucha čistou, suchou handričkou.
- Uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a klimatizácie.
- Zariadenie nenakláňajte, pretože by sa do spodnej časti mohla dostať voda a spôsobiť poruchu.
- Nepoužívajte ho dlhšie ako 10 hodín. Pred opätovným spustením počkajte 60 minút, aby nedošlo k poškodeniu ultrazvukového článku.
- Nepridávajte esenciálne oleje ani aromaterapeutické látky. Chemické vonné látky, korenie alebo nečistoty spôsobujú poruchy.
- Používajte iba vodu z vodovodu, nepoužívajte minerálnu vodu, perlivú vodu, vodu Salvus alebo kúpeľnú vodu, p r e t o ž e by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Počas používania prístrojom nehýbte.
- Nedotýkajte sa žiadnej časti výrobku mokrymi rukami.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Kábel by sa nemal križovať a v ž i a d n o m bode by nemala pôsobiť silná ťahová sila.
- Ak ucítite zápach horenia, okamžite sa odpojte.
- Nikdy neodpájajte sieťovú zástrčku, keď je spotrebič v prevádzke.

Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje správne, skontrolujte nasledovné:

Bezchybnosť	Možná príčina	Navrhované riešenie
Nezapína sa - vypína sa skôr	<ul style="list-style-type: none"> • Je v nádrži dostatok vody? • Pripojenie napájacieho kábla vhodné? 	<ul style="list-style-type: none"> • Naplňte nádrž vodou • Odpojte a skontrolujte káble a potom znovu sa opatrne pripojte.
Žiadna alebo abnormálna hmla	<ul style="list-style-type: none"> • Nedostatok vody • Príliš veľa vody • Je ultrazvuková bunka kontaminovaná? • Nie sú obklad a vnútorné obloženie nainštalované nesprávne? • Je prívod vzduchu v spodnej časti zariadenia z nejakého dôvodu zablokovaný? 	<ul style="list-style-type: none"> • Naplňte dostatočným množstvom vody. • Nikdy nenaplňajte nádrž na vodu nad hranicu MAX. • Informácie o správnom čistení ultrazvukového článku nájdete v návode na údržbu. • Odstráňte ho a riadne ho vymeňte, aby ste zabezpečili bezproblémovú tvorbu výparov. • Vyčistite alebo odblokujte nasávací otvor. • Obmedzené prúdenie vzduchu ovplyvňuje na vytváranie dvojíc.
Úniky vody zo zariadenia	<ul style="list-style-type: none"> • Sú obklad a vnútorné obloženie nesprávne nainštalované? • Prevrátilo sa zariadenie? • Nízka teplota alebo vysoká vlhkosť? 	<ul style="list-style-type: none"> • Odstráňte ho a riadne ho vymeňte, aby ste zabezpečili bezproblémovú tvorbu výparov. • Pri náhodnom rozliatí postupujte podľa pokynov. • Za týchto podmienok kondenzát rýchlo kondenzuje na kvapôčky vody.

Pozor

Množstvo a intenzita vyprodukovanej pary sa líši, ale to sa nepovažuje za chybu. Medzi faktory ovplyvňujúce množstvo hmly patrí množstvo vody v nádržke, vlhkosť a teplota v miestnosti a prúdenie vzduchu.

Ak v nádržke nie je voda, po stlačení tlačidla PAPIER sa spotrebič trikrát "ozve", aby vám pripomenul, že máte doplniť vodu. Spotrebič bez vody nebude fungovať.

V prípade, že sa spotrebič počas používania prevráti, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, aby ste zabránili poruche.

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete a odstráňte kryt.
- Vylejte zvyšnú vodu z nádržky na vodu.
- Jemne spotrebičom zatruste, aby ste vypustili vodu, ktorá sa môže nachádzať v kryte spotrebiča, a potom ho nechajte vyschnúť aspoň 24 hodín.

Záruka

Na kupolu Saltdome sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu nákupu a na napájací adaptér 6 mesiacov.

Spotrebič odovzdajte na opravu do servisného strediska, aby sa potvrdila platnosť záruky alebo po uplynutí záručnej doby.

Adresa: Scart Ltd - Service. 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Vždy ho vložte do obalu:

- Zariadenie
- napájanie
- diaľkové ovládanie (ak ho používate)
- krátky popis chyby
- kópiu faktúry (stačí však číslo faktúry alebo číslo objednávky).
- spiatočná adresa
- telefónne číslo (v prípade otázok sa s vami môžeme spojiť).
- e-mailová adresa (môžeme vás kontaktovať, ak máme nejaké otázky)
- ak spotrebič už nie je v záruke, uveďte, či si určite želáte jeho opravu, alebo požiadajte o vyčíslenie predpokladaných nákladov.

Služby zákazníkom:

Scart Ltd.

2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Tel: +36 53 200108

info@medimarket.hu - www.medimarket.hu