



Instrucțiuni de utilizare

SaltDome pentru terapie cu sare cu ultrasunete

Declarația de conformitate:

Dispozitivul a fost fabricat și verificat în conformitate cu un sistem de management certificat ISO 9001 și îndeplinește toate aspectele specificației convenite în conformitate cu cerințele europene.

Producător: J&R Electronics Co, China

Asistență tehnică de la Scart Kft Tel: +36 53 200108

www.medimarket.hu



Felicitări pentru achiziționarea dispozitivului de terapie cu sare cu ultrasunete SaltDome!

Dispozitivul de terapie cu sare SaltDome este conceput pentru uz casnic. Acesta utilizează atomizarea cu ultrasunete pentru a crea un abur de soluție salină în rezervorul său, care conține particule de sare cu dimensiuni cuprinse între 1 și 5 microni. Aceste particule pot ajunge în toate părțile plămânilor. Moleculele de sare (NaCl) de pe pereții căilor respiratorii au un efect osmotic, ajutând la dizolvarea secrețiilor și facilitând eliminarea acestora. Ajută la protecția împotriva bacteriilor, virusilor și ciupercilor, reduce inflamația și îmbunătățește indirect oxigenarea și umidificarea căilor respiratorii.

S-a dovedit că terapia cu sare ajută la prevenirea bolilor respiratorii. Cu siguranță protejează împotriva alergiilor respiratorii superioare, chiar și a răcelilor și gripei (dar nu garantează că nu vă veți îmbolnăvi).

În cazul bolilor respiratorii cronice (BPOC, astm, fibroză chistică etc.), poate fi utilizată ca terapie complementară la tratamentul medical.

Ajută la ameliorarea simptomelor alergice ale căilor respiratorii superioare.


SaltDome oferă aer sărat și ioni negativi care nu numai că îmbunătățesc afecțiunile care afectează sistemul respirator, dar sunt, de asemenea, benefice pentru eficiența muncii și concentrare. Dispozitivul de terapie cu sare SaltDome este livrat cu un adaptor de rețea, un manual de instrucțiuni, un pahar de amestecare și o lingură de distribuire. Opțional, este disponibilă sarea de rocă naturală Parajdi sau Himalaya.

Acest instrument este ușor de utilizat. Conectați-l, umpleți rezervorul cu saramură și folosiți-l. Deoarece terapia cu sare este eficientă atunci când este folosită pe o perioadă lungă de timp, se recomandă să o folosiți noaptea, în timp ce dormiți. Așezați aparatul pe noptieră, lângă pat, la aceeași înălțime cu corpul dumneavoastră, și bucurați-vă de efectele minunate ale sării naturale. Cu cât dispozitivul este mai aproape de dumneavoastră, cu atât este mai eficient - mai puțină sare benefică va pătrunde în plămâni de la un dispozitiv plasat mai departe.

SaltDome este silențios și nu deranjează somnul majorității oamenilor. Dacă sunteți sensibil la sunet, ar trebui să mutați dispozitivul mai departe.

Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm o utilizare regulată, pe termen lung.

Detalii despre dispozitiv

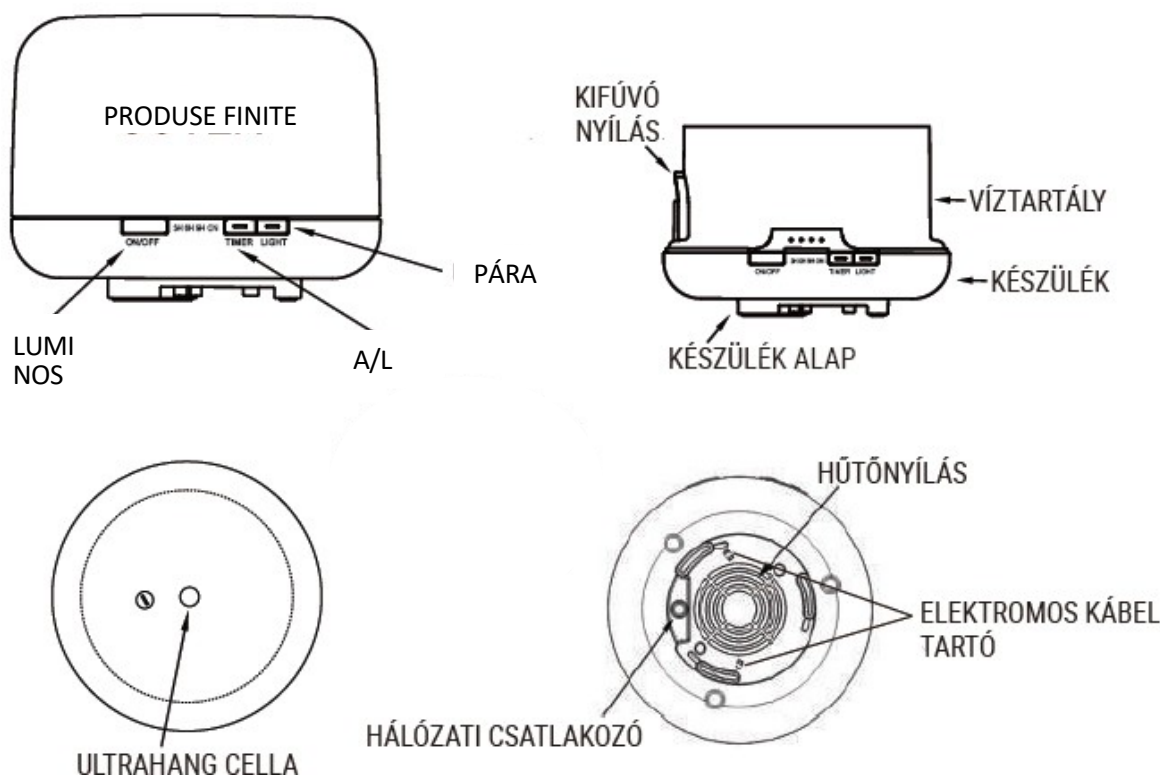

Utilizați

1. Așezați aparatul pe o suprafață plană, stabilă și uscată unde va fi utilizat (noptieră) și ridicați capacul superior. **Fig. 1 (FIG1)** Nu așezați o față de masă sau alte materiale textile sub aparat, deoarece acestea pot bloca orificiul de aerisire.
2. Conectați adaptorul de alimentare în priză din partea de jos a dispozitivului. **Figura 2 (FIG2)**
3. În 500 ml (jumătate de litru) de apă, dizolvați 1 lingură (1 gram) de sare gemă (NU MAI MULT!) **Figura 4 (FIG4)**
4. Turnați saramura pregătită în rezervorul de apă, care se va umple apoi. Nivelul apei nu trebuie să depășească nivelul maxim. **Figura 5 (FIG5)**
 Dacă coloana de apă este prea mare, celula cu ultrasunete nu poate produce umiditate, astfel încât apa din rezervor să nu se termine.
5. Este normal să vedeți murdărie pe fundul rezervorului după ce sarea s-a dizolvat. Sarea gemă este naturală și nerafinată. Nu este periculoasă pentru dumneavoastră!
 Nu introduceți apă într-un aparat care este deja pornit!
 Dacă apa de la robinet este dură sau conține clor, folosiți apă dedurizată sau îmbuteliată.
6. Dizolvarea a 1 lingură (1 gram) de sare gemă este suficientă în scopuri medicinale. Nu este nevoie de mai mult! Un efect mai puternic nu se așteaptă de la mai multă sare, ci de la mai mult timp petrecut în aerul sărat!
7. Așezați capacul superior în poziție și rotiți priză în direcția dorită.
8. Conectați fișa de alimentare la priză de perete. **Figura 6 (FIG6)**
9. Apăsăți butonul POWER pentru a porni. **Figura 9 (FIG9)**
 Aparatul va porni numai dacă există saramură în rezervor. LED-ul "1 oră" care indică starea de pornire se va aprinde și aparatul va începe să funcționeze.
 Particulele microscopice de sare ies din dispozitiv prin deschiderea superioară.
 Cel mult se poate vedea o ușoară ceață, și asta e normal! Din aparat iese foarte puțină ceață.
10. Apăsăți din nou butonul POWER pentru a seta temporizatorul. Timpul poate fi setat la 1 oră, 3 ore, 6 ore. După expirarea timpului setat, dispozitivul se va opri automat.
 Apăsăți din nou butonul POWER pentru a activa lumina LED. În această poziție, aparatul va funcționa continuu, oprindu-se doar atunci când rezervorul este gol.
 Apăsăți din nou butonul POWER pentru a opri aparatul.
11. A/M (Low/High Vapour Output) - utilizați butonul A/M pentru a reduce/crește cantitatea de vapori emiși. Schimbarea este abia perceptibilă cu ochiul liber. Diferența de ieșire a vaporilor între cele două moduri este de aproximativ 20-25%. **Figura 8 (FIG8)**
12. LUMINĂ - apăsarea butonului aprinde LED-ul încorporat în dispozitiv, iar acesta își schimbă culoarea în mod continuu la fiecare câteva secunde. Dacă vă place o culoare, apăsați din nou butonul pentru a o seta ca fiind permanentă.
 Apăsăți din nou butonul LIGHT pentru a trece de la o culoare la alta. În cele din urmă, lumina poate fi stinsă. **Figura 7 (FIG7)**

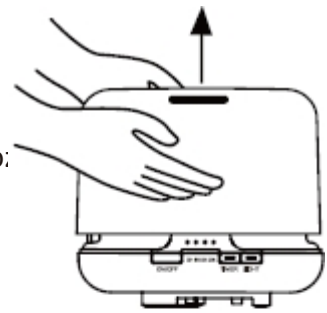


Fig 1

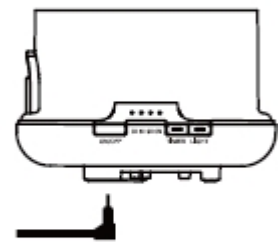


Fig 2

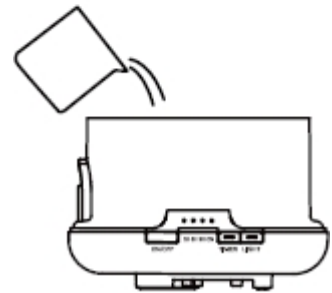


Fig 3



Fig 4

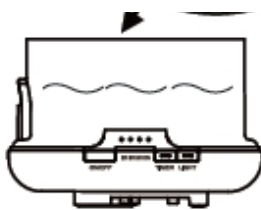


Fig 5

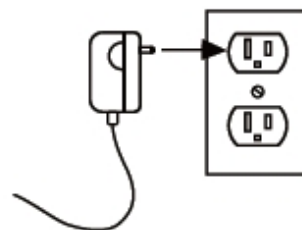


Fig 6

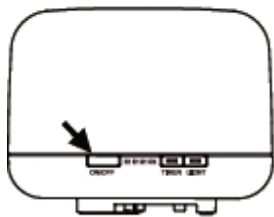


Fig 7

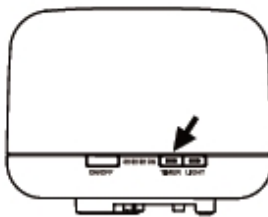


Fig 8

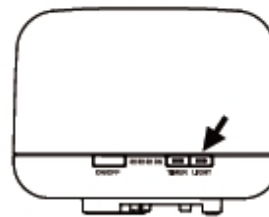


Fig 9

Aparatul se va opri automat atunci când nu mai există saramură în rezervor. Rezervorul de apă se epuizează în aproximativ 5-9 nopți. Pentru a relua utilizarea, umpleți din nou rezervorul cu saramură.

Odată ce unitatea este încărcată, nu o înclinați sau mutați și nu scoateți capacul superior.

Dacă nu există apă în rezervorul de apă, apăsarea butonului ON / OFF va emite un semnal sonor pentru a vă reaminti să adăugați apă.

Dispozitivul nu va funcționa fără apă.

Utilizarea dispozitivului este recomandată ca un tratament de cel puțin 10-14 zile. Nu lăsați apă în dispozitiv atunci când nu îl utilizați. Goliți și depozitați dispozitivul într-un loc uscat.

Telecomandă

Dispozitivul poate fi operat și prin telecomandă.

ON/OFF = BE/KI

TRANSMISIUNE

CANTITATEA DE PĂRA



FUNȚIONAR
E CONTINUĂ
INTERMITENT
Ă

LUMINOS

Întreținere și curățare

La fiecare câteva zile, curățați dispozitivul după cum urmează:

1. Deconectați aparatul de la rețea și scoateți capacul.
2. Scurgeți apa rămasă pe partea în care vedeți semnul "DRAIN SIDE".
3. Curățați aparatul cu un pahar de acid citric dizolvat în apă caldă și o cârpă moale și ștergeți-l cu un prosop de hârtie (decalcifiere).
4. Curățați ușor celula cu ultrasunete (mica adâncitură rotundă din partea de jos a rezervorului de apă) cu o cârpă moale.
5. Nu folosiți niciodată alți acizi, enzime sau detergenți, deoarece aceștia pot cauza defecțiuni.
6. În interiorul rezervorului de apă există, de asemenea, un capac interior care poate fi îndepărtat pentru curățare. Localizați mânerul și scoateți capacul interior. După curățare, introduceți mai întâi ieșirea de aer și apoi apăsați partea laterală a mânerului până când auziți un clic.
7. Pentru a depozita aparatul, curățați-l temeinic în conformitate cu instrucțiunile. După ce este uscat, puneți-l înapoi în ambalajul original și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

FOARTE IMPORTANT:

Utilizați numai o cârpă moale pentru a curăța celula cu ultrasunete. Nu o atingeți niciodată cu un obiect ascuțit sau dur.

Nu scufundați NICIODATĂ partea inferioară a aparatului în apă și aveți grijă să nu intrați apă în interiorul AIR sau în alte deschideri.

După încărcare, NU mutați dispozitivul dintr-un loc în altul. Întotdeauna scoateți capacul și goliți rezervorul de apă înainte de a-l muta în alt loc.

Condiții de transport și depozitare: -20 °C - 55 °C, umiditate ≤95%, presiune 70-106 kPa.

Condiții de funcționare: 5- 40°C, umiditate 30-80%, presiune 80kPa - 106kPa.

Date tehnice

Tensiune de intrare: 24V Putere: 13W

Metoda de umidificare: celulă cu ultrasunete

2.4Mhz Capacitatea rezervorului de apă: 500ml

Nivelul de zgomot: <35dB

Adaptor: intrare 100-240V~ 50/60Hz

Rezistență la apă: IPX0

Dimensiunile dispozitivului:

168x121mm Greutatea dispozitivului:

aproximativ 520 gr.

Măsuri de precauție

Vă rugăm să citiți și să respectați următoarele:

- Țineți întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană și nivelată. Nu așezați o pernă sau o pătură dedesubt, deoarece aceasta va bloca orificiile de ventilație de dedesubt, provocând supraîncălzirea și defectarea aparatului.
- Nu umpleți niciodată apa peste marcajul "MAX".
- Nu adăugați mai multă sare în apă decât se recomandă. Mai multă sare nu conferă un efect mai puternic asupra sănătății! Pentru un efect mai puternic, petreceți mai mult timp în aburul de sare!
- Utilizarea unei soluții de sare prea concentrate (mai multă sare decât cea recomandată) nu va crește efectul, dar va duce la o funcționare defectuoasă a aparatului (se va depune pe ventilator și îl va împiedica să se rotească).
- Folosiți sare grunjoasă naturală și fără aditivi, cum ar fi sarea grunjoasă Parajdi sau sarea de Himalaya.
- Nu folosiți sare de mare, sare care conține iod sau orice alt aditiv!
- Dacă rezervorul este gol, nu porniți aparatul.
- Respectați instrucțiunile de întreținere și curățați aparatul în mod regulat pentru a preveni funcționarea defectuoasă a acestuia.
- Deconectați întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de întreținere.
- După utilizare, turnați apa rămasă din "Latura de scurgere" a rezervorului și ștergeți dispozitivul cu o cârpă curată și uscată.
- A se păstra departe de lumina directă a soarelui, de sursele de căldură și de aerul condiționat.
- Nu înclinați aparatul, deoarece apa ar putea intra în partea inferioară și provoca o funcționare defectuoasă.
- Nu îl utilizați mai mult de 10 ore la un moment dat. Așteptați 60 de minute înainte de repornire pentru a evita deteriorarea celulei cu ultrasunete.
- Nu adăugați uleiuri esențiale sau substanțe de aromaterapie. Parfumurile chimice, condimentele sau impuritățile vor provoca defecțiuni.
- Folosiți numai apă de la robinet, nu folosiți apă minerală, apă gazoasă, apă Salvus sau apă de spa, deoarece acestea pot deteriora aparatul.
- Nu mutați dispozitivul în timpul utilizării.
- Nu atingeți nicio parte a produsului cu mâinile umede.
- A se ține departe de copii și animale de companie.
- Cablul nu trebuie să se intersecteze și nu trebuie să se aplice niciodată o forță de tracțiune puternică în niciun punct.
- Dacă simțiți un miros de arsură, deconectați imediat.
- Nu deconectați niciodată fișa de alimentare în timp ce aparatul este în funcțiune.

Depanare

Dacă dispozitivul nu funcționează corect, verificați următoarele:

Lipsa de defecțiune	Cauza posibilă	Soluția propusă
Nu pornește - se oprește devreme	<ul style="list-style-type: none"> Este suficientă apă în rezervor? Conectarea cablului de alimentare adecvat? 	<ul style="list-style-type: none"> Umpleți rezervorul cu apă Deconectați și verificați cablurile, apoi reconectați-vă cu atenție.
Nu există ceață sau este anormală	<ul style="list-style-type: none"> Nu este suficientă apă Prea multă apă Este celula cu ultrasunete contaminată? Sunt placarea și căptușeala interioară instalate incorect? Este blocată intrarea de aer din partea de jos a aparatului din anumite motive? 	<ul style="list-style-type: none"> Se umple cu apă suficientă. Nu umpleți niciodată rezervorul de apă peste linia MAX. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de întreținere pentru curățarea corespunzătoare a celulei cu ultrasunete. Îndepărtați-l și înlocuiți-l în mod corespunzător pentru a vă asigura că formarea de vapori nu este împiedicată. Curățați sau deblocați orificiul de admisie. Fluxul de aer restricționat afectează pentru formarea de perechi.
Scurgeri de apă din dispozitiv	<ul style="list-style-type: none"> Sunt placarea și căptușeala interioară instalate incorect? S-a răsturnat dispozitivul? Temperatură scăzută sau umiditate ridicată? 	<ul style="list-style-type: none"> Îndepărtați-l și înlocuiți-l în mod corespunzător pentru a vă asigura că formarea de vapori nu este împiedicată. Urmați instrucțiunile privind scurgerile accidentale. În aceste condiții, condensul se condensează rapid în picături de apă.

Atenție

Cantitatea și intensitatea vaporilor produși variază, dar acest lucru nu este considerat un defect. Factorii care influențează cantitatea de ceață includ cantitatea de apă din rezervor, umiditatea și temperatura din încăperea și fluxul de aer.

Dacă nu există apă în rezervor, apăsarea butonului PAPER va face ca aparatul să "bip" de 3 ori pentru a vă reaminti să adăugați apă. Aparatul nu va funcționa fără apă.

În cazul în care aparatul se răstoarnă în timpul utilizării, vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a evita funcționarea defectuoasă.

- Scoateți aparatul din priză și îndepărtați capacul.
- Turnați apa rămasă din rezervorul de apă.
- Scuturați ușor aparatul pentru a scurge apa care se poate afla în carcasa aparatului, apoi lăsați-l să se usuce timp de cel puțin 24 de ore.

Garanție

Saltdome este garantat timp de 12 luni de la data cumpărării, iar adaptorul de alimentare timp de 6 luni.

Returnați aparatul la un centru de service pentru reparații în vederea validării garanției sau după expirarea perioadei de garanție.

Adresă: Scart Ltd - Service. 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Puneți-l întotdeauna în ambalaj:

- Dispozitiv
- sursa de alimentare
- telecomanda (dacă o utilizați)
- scurtă descriere a erorii
- o copie a facturii (dar este suficient un număr de factură sau un număr de comandă)
- adresa de retur
- numărul de telefon (vă putem contacta dacă aveți întrebări)
- adresa de e-mail (vă putem contacta în cazul în care avem întrebări)
- în cazul în care aparatul nu mai este în garanție, indicați dacă doriți neapărat să fie reparat sau solicitați o ofertă pentru costul estimat.

Serviciul clienți:

Scart Ltd.

2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Tel: +36 53 200108

info@medimarket.hu - www.medimarket.hu