



# Návod na použitie

SaltDome na ultrazvukovú soľnú terapiu

## Vyhlasenie o zhode:

Prístroj bol vyrobený a overený v súlade so systémom riadenia certifikovaným podľa noriem ISO 9001 a všetky aspekty špecifikácie spĺňajú európske požiadavky.

Výrobca: J&R Electronics Co, Čína  
Technická podpora od spoločnosti Scart Kft

Tel: +36 53 200108 [www.medimarket.hu](http://www.medimarket.hu)



## Blahoželáme vám k zakúpeniu ultrazvukového zariadenia na soľnú terapiu SaltDome!

Prístroj na soľnú terapiu SaltDome je určený na domáce použitie. Využíva ultrazvukové rozprašovanie na vytvorenie pary soľného roztoku v zásobníku, ktorý obsahuje častice soli s veľkosťou od 1 do 5 mikrónov. Tieto častice sa môžu dostať do všetkých častí pľúc. Molekuly soli (NaCl) na stenách dýchacích ciest majú osmotický účinok, pomáhajú rozpúšťať sekréty a uľahčujú ich odstraňovanie. Pomáha chrániť pred baktériami, vírusmi a plesňami, zmierňuje zápal a nepriamo zlepšuje okysličenie a zvlhčovanie dýchacích ciest.

Je dokázané, že soľná terapia pomáha predchádzať ochoreniam dýchacích ciest. Určite chráni pred alergiami horných dýchacích ciest, dokonca aj pred prechladnutím a chrípkou (ale nezaručuje, že neochoriete).

V prípade chronických respiračných ochorení (CHOCHP, astma, cystická fibróza atď.) je medikamentózna liečba doplnková možno použiť ako terapiu.

Pomáha zmierniť alergické príznaky horných dýchacích ciest.


SaltDome poskytuje slaný vzduch a záporné ióny, ktoré nielen zlepšujú stavy ovplyvňujúce dýchací systém, ale sú tiež prospešné pre pracovnú výkonnosť a koncentráciu. Prístroj na soľnú terapiu SaltDome sa dodáva so sieťovým adaptérom, návodom na použitie, miešacím pohárom a dávkovacou lyžičkou. Voliteľne je k dispozícii prírodná kamenná soľ Parajdi alebo himalájska soľ.

Tento nástroj sa ľahko používa. Zapojte ho, naplňte nádrž slaným nálevom a použite ho. Keďže soľná terapia je účinná dlhodobou, odporúča sa používať ju v noci počas spánku. Prístroj umiestnite na nočný stolík v blízkosti postele, v rovnakej výške ako je vaše telo, a užívajte si úžasné účinky prírodnej soli. Čím bližšie je zariadenie k vám, tým je účinnejšie - zo zariadenia umiestneného ďalej sa do vašich pľúc dostane menej prospešnej soli.

SaltDome je tichý a neruší spánok väčšiny ľudí. Ak ste citliví na zvuk, mali by ste zariadenie premiestniť ďalej.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame pravidelné a dlhodobé používanie.

### Podrobnosti o zariadení

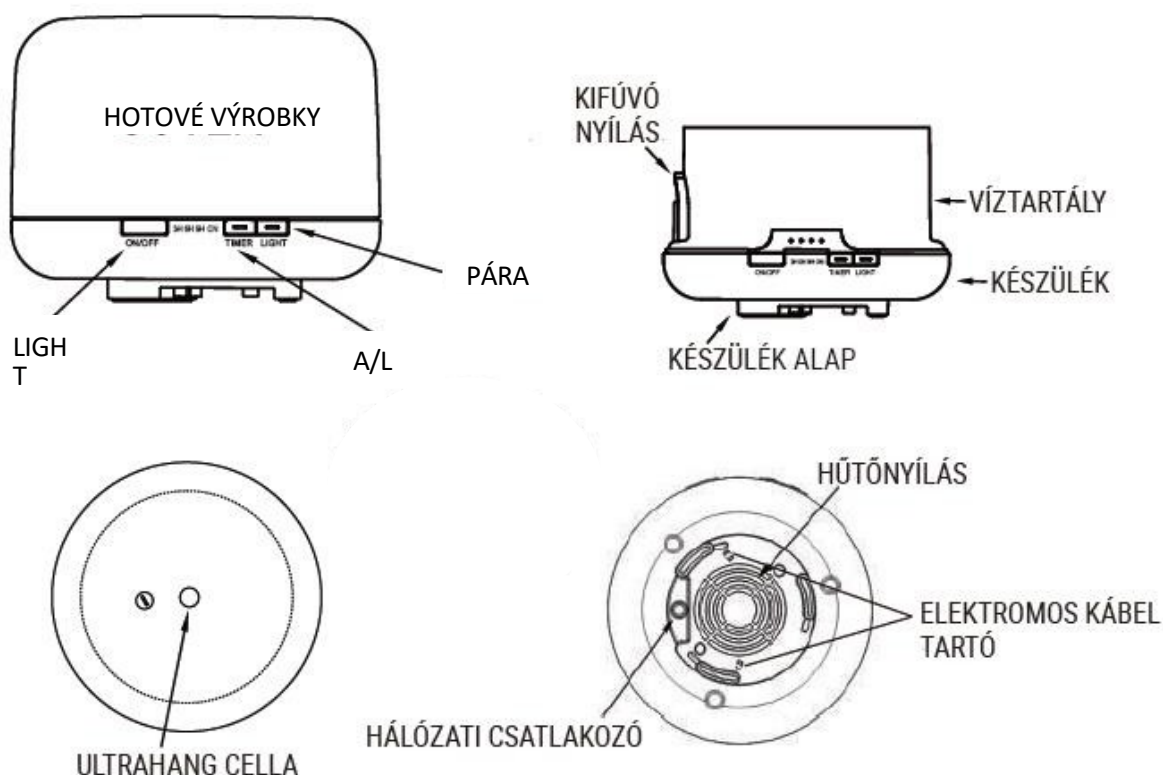

## Použite

1. Spotrebič umiestnite na vodorovný, stabilný a suchý povrch, na ktorom sa bude používať (nočný stolík), a odklopte horný kryt. **Obr. 1 (FIG1)** Pod spotrebič neumiestňujte obrus ani inú textíliu, pretože môže zablokovať vetrací otvor.
2. Napájací adaptér vždy najprv zapojte do zásuvky v spodnej časti zariadenia. **Obrázok 2 (FIG2).**
3. V 500 ml (pol litra) vody rozpustíte 1 odmerku (1 gram) kamenná soľ (NIE VIAC!) **Obrázok 4 (FIG4)**
4. Pripravený solný roztok nalejte do nádrže na vodu, ktorá sa následne naplní. Hladina vody by nemala prekročiť maximálnu úroveň. **Obrázok 5 (FIG5)**  
Ak je vodný stĺpec príliš vysoký, ultrazvuková bunka nemôže odvádzať aby v nádrži nedošla voda.
5. Je normálne, že po rozpustení soli sa na dne nádrže objavia nečistoty. Kamenná soľ je prírodná a nerafinovaná. Nie je pre vás nebezpečná!  
Nepĺňte vodu do spotrebiča, ktorý je už zapnutý!  
Ak je voda z vodovodu tvrdá alebo obsahuje chlór, používajte zmäččenú alebo balenú vodu.
6. Na liečebné účely stačí rozpustiť 1 lyžicu (1 gram) kamennej soli. Viac nie je potrebné! Silnejší účinok sa neočakáva od väčšieho množstva soli, ale od dlhšieho pobytu na slanom vzduchu!
7. Nasadte horný kryt a otočte zásuvku požadovaným smerom.
8. Pripojte datapad k sieti. **Obrázok 6 (FIG6)**  
Vždy používajte zástrčku alebo rozvádzač s prepäťovou ochranou!
9. Stlačením tlačidla POWER sa zapnete. **Obrázok 9 (FIG9)**  
Spotrebič sa zapne len vtedy, ak je v nádrži soľanka. A rozsvieti sa kontrolka "1 hodina" indikujúca zapnutý stav a zariadenie sa spustí prevádzka.  
Mikroskopické častice soli vychádzajú zo zariadenia cez horný otvor.  
Môžete vidieť nanajvýš miernu hmlu, a to je normálne! Zo spotrebiča vychádza veľmi málo hmly.
10. Opätovným stlačením tlačidla POWER nastavíte časovač. Čas môžete nastaviť na 1 hodinu, 3 hodiny, 6 hodín  
hodín. Po uplynutí nastaveného času sa zariadenie automaticky vypne.  
Opätovným stlačením tlačidla POWER zapnete kontrolku LED. V tejto polohe bude spotrebič pracovať nepretržite a zastaví sa len vtedy, keď je nádrž prázdna.  
Opätovným stlačením tlačidla POWER zariadenie vypnete.
11. A/M (nízky/vysoký výstup pary) - pomocou tlačidla A/M znížite/zvýšite množstvo výstupu pary. Zmena je voľným okom sotva badateľná. Rozdiel vo výstupe pary medzi týmito dvoma režimami je približne 20-25 %. **Obrázok 8 (FIG8)**
12. SVETLO - stlačením tlačidla sa zapne LED dióda zabudovaná v zariadení, ktorá každých niekoľko sekúnd plynule mení farbu. Ak sa vám niektorá farba páči, opätovným stlačením tlačidla ju nastavíte na trvalú.  
Opätovným stlačením tlačidla LIGHT môžete prechádzať medzi farbami. Nakoniec môžete svetlo vypnúť. **Obrázok 7 (FIG7)**

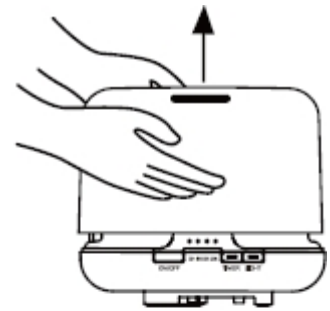


Fig 1

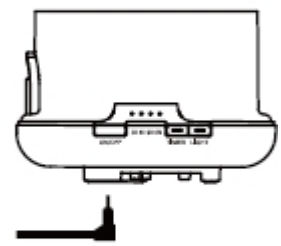


Fig 2

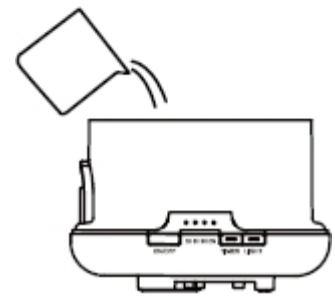


Fig 3



Fig 4

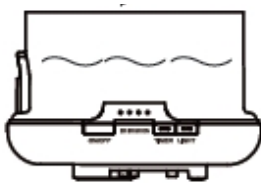


Fig 5

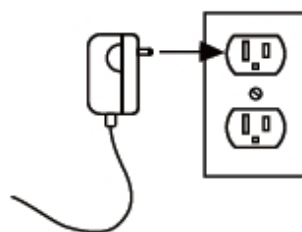


Fig 6



Fig 7



Fig 8

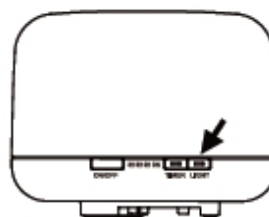


Fig 9

Spotrebič sa automaticky zastaví, keď v nádrži už nie je soľanka. Nádržka na vodu sa vyčerpá približne za 5-9 nocí. Ak chcete pokračovať v používaní, doplňte do nádržky soľanku.

Po nabití jednotky ju nenakláňajte, nehýbte s ňou ani nevyberajte horný kryt.

Ak v nádržke na vodu nie je voda, stlačením tlačidla ON/OFF sa ozve zvukový signál, ktorý vám pripomenie, aby ste vodu doplnili.

Zariadenie nebude fungovať bez vody.

Používanie prístroja sa odporúča ako liečebný postup počas najmenej 10-14 dní. Nenechávajte v prístroji vodu, keď ho nepoužívate. Prístroj vyprázdňte a uložte na suchom mieste.

## Diaľkové ovládanie

Zariadenie sa dá ovládať aj diaľkovým ovládaním.

ON/OFF = BE/KI

TRANSMISIA

PÁRA KVANTITA



PRERUŠOVANÁ  
NEPRETRŽITÁ  
PREVÁDZKA

LIGHT

## Údržba a čistenie

Každých niekoľko dní zariadenie vyčistíte nasledujúcim spôsobom:

1. Odpojte zariadenie od elektrickej siete a odstráňte kryt.
2. Zvyšnú vodu vypustíte na strane, na ktorej sa nachádza nápis "DRAIN SIDE".
3. Na čistenie použijete pohár kyseliny citrónovej rozpustenej v pohári vlažnej vody a mäkkú handričku.  
a utrite do sucha papierovou utierkou (odstraňovanie vodného kameňa).
4. Ultrazvukový článok (malá okrúhla priehlbina na dne vodnej nádrže) jemne očistite mäkkou handričkou.
5. Nikdy nepoužívajte iné kyseliny, enzýmy alebo čistiace prostriedky, pretože môžu spôsobiť poruchu.
6. Vo vnútri nádržky na vodu sa nachádza aj vnútorné veko, ktoré možno odňať na čistenie.  
Nájdite rukoväť a vytiahnite vnútorný kryt.  
Po čistení najprv zasunúť výstup vzduchu a potom stlačte rukoväť kým neuslyšíte cvaknutie.
7. Ak chcete zariadenie uskladniť, dôkladne ho vyčistite podľa pokynov. Keď je suchý, vložte ho späť na miesto  
v pôvodnom obale a skladujte na chladnom a suchom mieste.

### DÔLEŽITÉ:

Na čistenie ultrazvukovej bunky používajte len mäkkú handričku. Nikdy sa ho nedotýkajte ostrým alebo tvrdým predmetom.

NIKDY neponárajte spodnú časť spotrebiča do vody a dbajte na to, aby sa voda nedostala dovnútra  
ÚROVNE  
alebo iné otvory.

Po nabití zariadenie NEPREMIESTAJTE z jedného miesta na druhé. Pred premiestnením na iné miesto vždy odstráňte veko a vyprázdňte nádržku na vodu.

**Podmienky prepravy a skladovania:** -20 °C - 55 °C, vlhkosť ≤95 %, tlak 70-106 kPa.

**Prevádzkové podmienky:** 5 - 40 °C, vlhkosť 30 - 80 %, tlak 80 kPa - 106 kPa.

## Technické údaje

Vstupné napätie: 24 V Výkon: 13 W

Metóda zvlhčovania: 2,4Mhz ultrazvukový

článok Kapacita nádržky na vodu: 500 ml

Hladina hluku: <35 dB

Adaptér: vstup 100-240V~ 50/60Hz

Odolnosť voči vode: IPX0

Rozmery zariadenia: 168x121 mm

Hmotnosť zariadenia: približne 520

gr.

## Preventívne opatrenia

### Prečítajte si a dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Spotrebič vždy držte na stabilnom, rovnom a rovnom povrchu. Neumiestňujte podň vankúš alebo prikrývku, pretože by to zablokovalo ventilačné otvory pod spotrebičom, čo by spôsobilo jeho prehriatie a poruchu.
- Nikdy nenapĺňajte vodu nad značku "MAX".
- Do vody nepridávajte viac soli, ako sa odporúča. Viac soli neprináša silnejší zdravotný účinok! Pre silnejší účinok strávte v soľnej pare viac času!
- Použitie príliš koncentrovaného soľného roztoku (viac soli, ako sa odporúča) nezvýši účinok, ale povedie k poruche spotrebiča (usadí sa na ventilátore a zabráni jeho otáčaniu).
- Používajte prírodnú kamennú soľ bez prídavných látok, napríklad kamennú soľ Parajdi alebo himalájsku soľ.
- Nepoužívajte morskú soľ, soľ obsahujúcu jód alebo iné prísady (nečistoty v nich nie sú pre pľúca prospešné).
- Ak je nádrž prázdna, zariadenie nezapínajte.
- Podľa pokynov na údržbu pravidelne čistite spotrebič, aby ste zabránili poškodeniu porucha.
- Pred údržbou vždy odpojte napájanie.
- Po použití vylejte všetku zostávajúcu vodu z "ODVODŇOVACEJ STRANY" nádrže a utrite zariadenie do sucha čistou, suchou handričkou.
- Uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a klimatizácie.
- Zariadenie nenakláňajte, pretože by sa do spodnej časti mohla dostať voda a spôsobiť poruchu.
- Nepoužívajte ho dlhšie ako 10 hodín. Pred opätovným spustením počkajte 60 minút, aby ste zabránili poškodeniu buniek ultrazvukom.
- Nepridávajte esenciálne oleje ani aromaterapeutické látky. Chemické vonné látky, korenie alebo nečistoty spôsobujú poruchy.
- Používajte iba vodu z vodovodu, nepoužívajte minerálnu vodu, perlivú vodu, vodu Salvus alebo kúpeľnú vodu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Počas používania prístrojom nehýbte.
- Nedotýkajte sa žiadnej časti výrobku mokrými rukami.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Kábel by sa nemal krížiť a nikdy by nemal pôsobiť silnou ťahovou silou na jeden v ktoromkoľvek bode.
- Ak ucítite zápach horenia, okamžite sa odpojte.
- Nikdy neodpájajte sieťovú zástrčku, keď je spotrebič v prevádzke.

### VAROVANIE!

***Ak sa spotrebič nebude dlhší čas používať (odchod na dovolenku, niekoľkodňová neprítomnosť), vyprázdňte nádrž a vytrite ju do sucha, pretože voda, ktorá zostane v spotrebiči a odparí sa, keď sa dlhší čas nepoužíva, môže spotrebič poškodiť.***

***Ak vaša elektrická sieť nie je chránená proti prepätiu a nepoužívate napájací pás s prepäťovou ochranou, v prípade búrky alebo blesku adaptér odpojte.***

## Riešenie problémov

Ak zariadenie nefunguje správne, skontrolujte nasledovné:

Bezchybnosť	Možná príčina	Navrhované riešenie
Nezapína sa - sa vypne skôr	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je v nádrži dostatok vody?</li> <li>Pripojenie napájacieho kábla vhodné?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naplňte nádrž vodou</li> <li>Odpojte a skontrolujte káble a potom ich opatrne znovu pripojte.</li> </ul>
Žiadna alebo abnormálna hmla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedostatok vody</li> <li>Príliš veľa vody</li> <li>Kontaminácia ultrazvukový článok?</li> <li>Sú obklad a vnútorné obloženie nesprávne nainštalované?</li> <li>Vzduch v spodnej časti zariadenia príjem z nejakého dôvodu upchaté?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Naplňte dostatočným množstvom vody.</li> <li>Nikdy nenaplňajte nádrž na vodu nad hranicu MAX.</li> <li>Skontrolujte údržbu pokyny pre správny ultrazvukový článok na čistenie.</li> <li>Odstráňte ho a riadne ho vymeňte, aby ste zabezpečili bezproblémovú tvorbu výparov.</li> <li>Vyčistite alebo odblokujte nasávací otvor.</li> <li>Obmedzené prúdenie vzduchu ovplyvňuje na vytváranie dvojíc.</li> </ul>
Zo zariadenia úniky vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sú obklad a vnútorné obloženie nesprávne nainštalované?</li> <li>Prevrátilo sa zariadenie?</li> <li>Nízka teplota alebo vysoká vlhkosť?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odstráňte ho a riadne ho vymeňte, aby ste zabezpečili bezproblémovú tvorbu výparov.</li> <li>Pri náhodnom rozliatí postupujte podľa pokynov.</li> <li>Za týchto podmienok kondenzát rýchlo kondenzuje na kvapôčky vody.</li> </ul>
Keď zapojím konektor v spodnej časti, iskrí to	Adaptér ste už zapojili do zásuvky a kábel pod napätím pripojili k zariadeniu ako druhé pripojenie.	Pripojením kábla namiesto pod prúdom spôsobíte mini skrat (iskrenie to indikuje!) a môžete poškodiť elektroniky, dokonca aj s prvým takýmto zásuvným modulom by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia. Vždy najprv zapojte zásuvku v spodnej časti zariadenia a potom pripojte adaptér do zásuvky.
Po výpadku napájania (alebo po veľkej búrke) sa zariadenie nespustí	Prúdové výkyvy "špička" spôsobená spätným prúdom môže poškodiť elektroniky (všetky elektrické zariadenia sú na to náchylné).	Ak váš dom alebo byt nemá sieťovú ochranu proti prepätiu, mali by ste zariadenie Saltdome prevádzkovať z distribučného alebo neprerušiteľného zdroja napájania, ktorý ho chráni pred prepätím. Okrem toho by ste pri búrke s bleskami mali použiť odpojte napájací adaptér.
Nepoužíval som ho niekoľko mesiacov, teraz ho chcem znova použiť, ale nechce sa spustiť.	Voda zostáva v nádrži aj po ukončení pravidelného používania spotrebiča. Voda sa odparuje, kondenzuje vo vnútri spotrebiča a spôsobuje koróziu elektrického diely.	Ak prestanete spotrebič používať, hoci aj na niekoľko dní, vyprázdňte vodu a nádržku a veko vytrite do sucha. Spotrebič odložte.

## Pozor

Množstvo a intenzita vyprodukovanej pary sa líši, ale to sa nepovažuje za chybu. Množstvo hmly zahŕňa množstvo vody v nádrži, vlhkosť v miestnosti a teplotu a prúdenie vzduchu.

Ak v nádržke nie je žiadna voda, stlačením tlačidla PAPIER 3-krát "zapípa" zariadenie. pripomenúť, aby ste doplnili vodu. Spotrebič nebude fungovať bez vody.

V prípade, že sa zariadenie počas používania prevráti, postupujte podľa nižšie uvedených krokov na odstránenie chyby

aby sa zabránilo prevádzke.

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete a odstráňte kryt.
- Vylejte zvyšnú vodu z nádržky na vodu.
- Jemne spotrebičom zatrasť, aby ste vypustili vodu, ktorá sa môže nachádzať v kryte, a potom nechajte schnúť aspoň 24 hodín.



## **Záruka a vymáhanie záruky**

Na kupolu Saltdome sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu nákupu a na napájací adaptér 6 mesiacov.

V prípade záručnej alebo mimozáručnej opravy pošlite zariadenie na nižšie uvedenú adresu.

**Adresa:** Scart Ltd - Service. 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Vždy ho vložte do obalu:

- Zariadenie
- napájanie
- diaľkové ovládanie (ak ho používate)
- krátky popis chyby
- kópiu faktúry (stačí však číslo faktúry alebo číslo objednávky).
- spätná adresa
- telefónne číslo (v prípade otázok sa s vami môžeme spojiť).
- e-mailová adresa (môžeme vás kontaktovať, ak máme nejaké otázky)
- ak spotrebič už nie je v záruke, uveďte, či chcete opravu alebo cenovú ponuku. sa pýta na očakávané náklady.

### **Služby zákazníkom:**

Scart Ltd.

2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Tel: +36 53 200108

info@medimarket.hu - [www.medimarket.hu](http://www.medimarket.hu)