



Használati útmutató

SaltDome ultrahangos sóterápiás készülékhez

Megfelelőségi nyilatkozat:

Az eszközt az ISO 9001 szabvány szerint tanúsított menedzsment rendszer szerint gyártották és ellenőrizték, és a megállapított specifikáció minden szempontjának megfelel az európai követelményeknek.

Gyártó: J&R Electronics Co, Kína

Műszaki támogatás: Scart Kft Tel: +36 53 200108 www.medimarket.hu



Gratulálunk a SaltDome ultrahangos sóterápiás készülék megvásárlásához!

A SaltDome sóterápiás készüléket otthoni használatra tervezték. Ultrahangos porlasztással a tartályába töltött sóoldalból párat hoz létre, mely 1-5 mikron méretű sórészecskéket tartalmaz. Ezek a részecskék képesek eljutni a tüdő minden részébe. A légutak falára kerülő só (NaCl) molekulák ozmotikus hatás révén segítik a váladékok oldódását és könnyítik az eltávolítását. Segíti a baktériumok, a vírusok és a gombák elleni védekezést, a gyulladást csökkenti, áttételesen javítja az oxigénellátásának javítását és a légutak nedvesítését.

A sóterápia igazoltan segíti a légúti betegségek megelőzését. Természetesen védelmet ad a felső légúti allergiák, sőt nátha és az influenza ellen (de nem garantálja a megbetegedés elkerülését).

Krónikus légúti betegségek (COPD, asztma, cisztás fibrózis, stb) esetén az orvosi kezelést kiegészítő terápiaként alkalmazható.

Hozzájárul az allergiás felső légúti tünetek enyhítéséhez.

A SaltDome gondoskodik a sós levegőről és a negatív ionokról, melyek nem csak a légzési rendszert érintő állapotokat javítja, de jótékonyan hat a munkavégzés hatékonyságára és az összpontosításra is.


A SaltDome sóterápiás készülék hálózati adapterrel, használati útmutatóval, keverőpohárral és adagolókanállal kerül szállításra. Opcionálisan rendelhető parajdi vagy himalájai természetes kősó.

Ez az eszköz könnyen használható. Csatlakoztassa a hálózathoz, töltsen fel sóoldattal a tartályt, és használja. Mivel a sóterápia tartósan alkalmazva hatékony, így javasolt éjjel, alvás közben alkalmazni. A készüléket az ágy közelében, a testével egy magasságban az éjjeliszekrényen helyezze el és élvezze a természetes só csodálatos hatását. Minél közelebb van a készülék önhöz, annál hatékonyabb – távolabb elhelyezett készülékből kevesebb jótékony só kerül a tüdőbe.

A SaltDome készülék csendes és a legtöbb ember alvását nem zavarja. Ha ön érzékeny a hangokra, akkor tegye a készüléket távolabb.

A legjobb eredmény elérése érdekében rendszeres, tartós alkalmazást javasolunk.

Készülék részletek

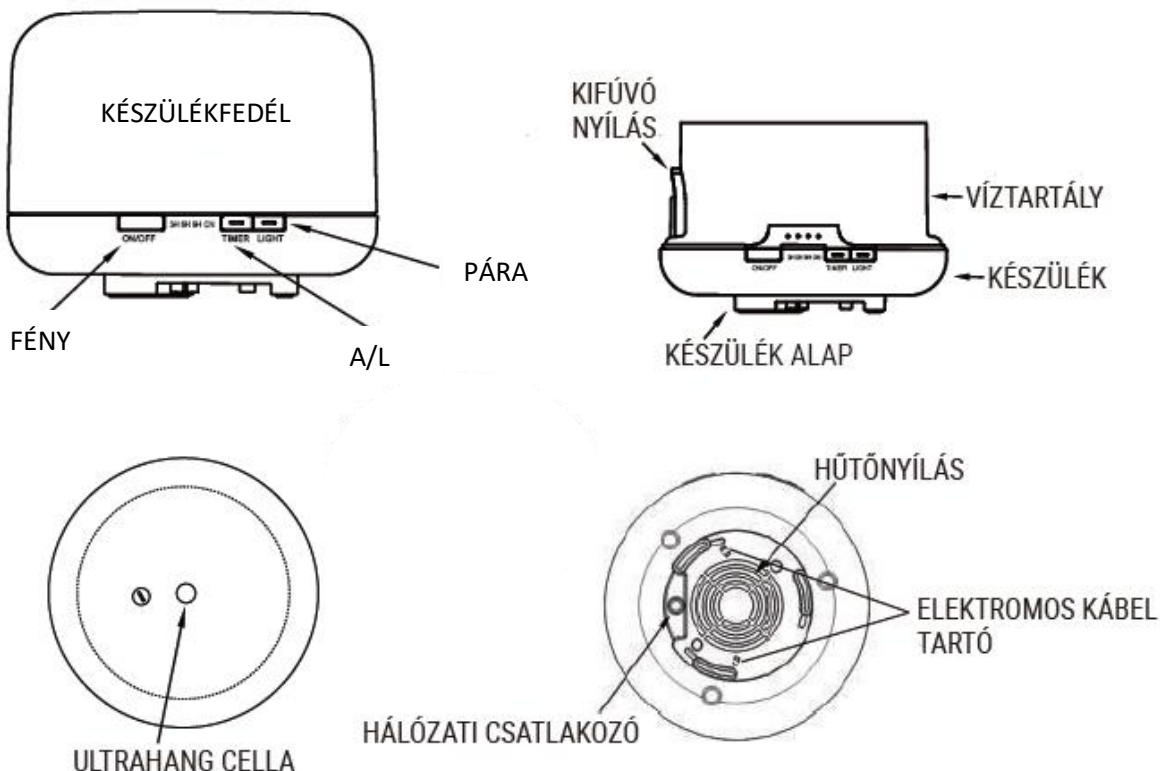

Használat

- Helyezze a készüléket egy vízszintes, stabil és száraz felületre, ahol azt használni fogja (éjjeliszekrény) és emelje le a felső burkolatot. **1. ábra (FIG1)** A készülék alatt ne legyen terítő vagy más textil, mert elzárhatja a levegőnyílást.
- Elsőként mindig a készüléken alul levő aljzathoz csatlakoztassa a hálózati adaptert. **2. ábra (FIG2).**
- 500 ml (fél liter) vízben oldjon fel 1 adagolókanálnyi (1gramm) kősót (NE TÖBBET!) **4. ábra (FIG4)**
- Öntse az elkészített sóoldatot a víztartályba, amely így megtelik. A vízszint ne haladja meg a Max szintet. **5. ábra (FIG5)**
Ha a vízszint túl magas, az ultrahang cella nem képes párákat előállítani, így nem fogy a tartályból a víz.
- Normális, ha a só oldódása után szennyeződést lát a tartály fenekén. A kősó természetes és finomítatlan. Nem jelent veszélyt Önre!
Ne töltsön vizet a már bekapcsolt készülékbe!
Ha a csapvíz kemény vagy klórt tartalmaz, akkor használjon lágyított vagy palackozott vizet.
- Gyógyhatás szempontjából elegendő az 1 kanálnyi (1gramm) kősó feloldása. Nem szükséges több! Erősebb hatás nem több sótól, hanem a sós levegőn töltött több időtől várható!
- Helyezze a felső fedelet a helyére és fordítsa a kifújó nyílást a kívánt irányba.
- Csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz. **6. ábra (FIG6)**
Mindig túlfeszültség védelemmel ellátott dugaljat vagy elosztót használjon!
- Bekapcsoláshoz nyomja meg a PÁRA gombot. **9. ábra (FIG9)**
A készülék csak akkor kapcsol be, ha a tartályban van sóoldat. A bekapcsolt állapotot jelző „1 óra” LED világít, és az eszköz elkezd a működést.
A mikroszkopikus só részecskék a felső nyíláson keresztül jutnak ki az eszközből.
Legfeljebb enyhe pára látható, és ez normális! Csak igen kevés pára áramlik ki a készülékből.
- A PÁRA gomb ismételt megnyomásával beállíthatja az időzítést. A beállítható idő 1 óra, 3 óra, 6 óra. A beállított időtartam után a készülék automatikusan kikapcsol.
A PÁRA gomb újabb megnyomására a LED fény a BE állásba áll. Ebben a helyzetben a készülék folyamatosan működik, csak a tartály kifogyása esetén áll le.
A PÁRA gomb ismételt megnyomására a készülék kikapcsol.
- A/M (Alacsony/Magas párákibocsátás) – az A/M gombbal csökkentheti/növelheti a kibocsátott páramennyiséget. A változás szabad szemmel alig észlelhető. A két mód között a párákibocsátásban mintegy 20-25% eltérés van. **8. ábra (FIG8)**
- FÉNY – a gomb megnyomásával bekapcsol a készülékbe épített LED és folyamatosan, néhány másodpercenként váltja a színét. Ha egy szín tetszik, akkor nyomja meg ismét a gombot és ezzel állandóra állítja be.
A FÉNY gomb ismételt megnyomásával tovább léphet a színek között. Végül a fény kikapcsolható. **7. ábra (FIG7)**

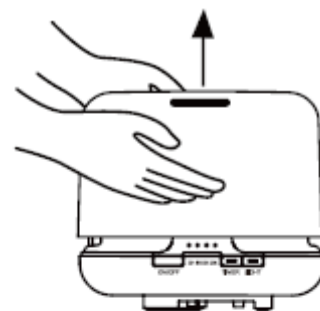


Fig 1

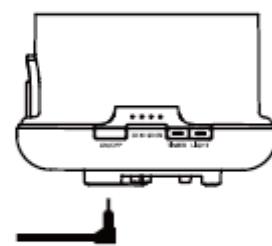


Fig 2

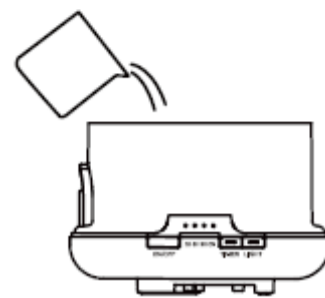


Fig 3



Fig 4

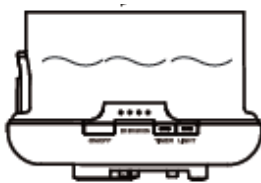


Fig 5

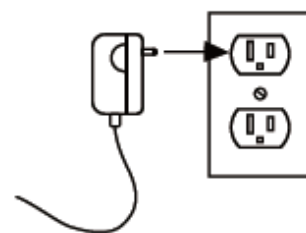


Fig 6



Fig 7

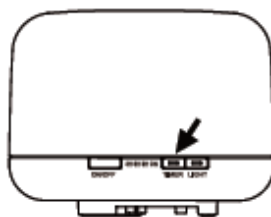


Fig 8

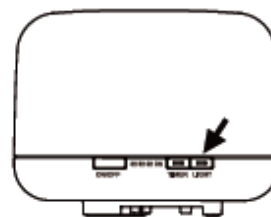


Fig 9

A készülék automatikusan leáll, ha a tartályban nincs több sóoldat. A víztartály körülbelül 5-9 éjszaka alatt fogy ki. A használat folytatásához töltsse fel a tartályt ismét sóoldattal.

Ha készüléket feltöltötte, akkor már ne döntse meg vagy mozgassa az egységet, és ne távolítsa el a felső burkolatot.

Ha a víztartályban nincs víz, akkor az ON / OFF megnyomásakor a készülék sípolással emlékezteti Önt a víz hozzáadás szükségességére.

A készülék víz nélkül nem működik.

A készülék használata kúraszerűen, legalább 10-14 napon át javasolt. Ha már nem használja a készüléket, ne hagyja benne a vizet! Öntse ki és tegye az eszközt száraz helyre.

Távírányító

A készülék távirányítóval is működtethető.

ON/OFF = BE/KI

IDŐZÍTÉS

PÁRA MENNYISÉG



SZAKASZOS
FOLYAMATOS
MŰKÖDÉS

FÉNY

Karbantartás és Tisztítás

Néhány naponta az alábbiak szerint tisztítsa meg az eszközt:

1. Válassza le a készüléket a hálózatról és távolítsa el a burkolatot.
2. A megmaradt vizet azon az oldalon öntse ki, ahol a "DRAIN SIDE" feliratot látja.
3. Egy pohár langyos vízben feloldott citromsavval és egy puha ronggyal tisztítsa meg az eszközt, és papírtörülővel törölje szárazra (vízkőmentesítés).
4. Finoman tisztítsa meg az ultrahang cellát (apró kerek mélyedés a víztartály alján) puha ruhával.
5. Soha ne használjon más savakat, enzimeket vagy mosószereket, mert hibás működést eredményezhet.
6. A víztartályon belül van egy belső fedél is, amelyet tisztításhoz is le lehet venni. Keresse meg a markolatot, és húzza ki a belső burkolatot.
A tisztítás után először helyezze be a légkiömlő nyílást, majd nyomja meg a markolat oldalán, amíg meg nem hallja a kattantást.
7. Tároláshoz az eszközt alaposan tisztítsa meg, az utasítások szerint. Ha megszáradt, tegye vissza eredeti csomagolásába és hűvös, száraz helyen tárolja.

FONTOS:

Az ultrahang cella tisztításához csak puha ruhát használjon. Soha ne érintse meg éles vagy kemény tárggyal.

SOHA ne merítse a készülék alsó részét vízbe, és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz belsejébe a LEVEGŐ vagy az egyéb nyílásokon sem.

Feltöltés után már NE mozgassa az eszközt egyik helyről a másikra. Mindig vegye le a fedelet és ürítse ki a víztartályt, mielőtt áthelyezné egy másik helyre.

Szállítási és tárolási körülmények: -20°C - 55°C, páratartalom ≤95%, nyomás 70-106 kPa.

Üzemelési körülmények: 5- 40°C, páratartalom 30-80%, nyomás 80kPa - 106kPa.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség: 24V

Teljesítmény: 13W

Párásítás módja: 2.4Mhz ultrahang cella

Víztartály kapacitása: 500ml

Zajszint: <35dB

Adapter: Input 100-240V~ 50/60Hz

Vízállóság: IPX0

Készülék méretek: 168x121mm

Készülék súly: kb 520 gr.

Óvintézkedések

Kérjük, hogy az alábbiakat olvassa el és tartsa be:

- A készüléket mindig stabil, vízszintes és sima felületen tartsa. Ne tegyen alá párnát, terítőt, mert ez elzárja az alul levő szellőzőnyílásokat, a készülék túlmelegszik és tönkremegy.
- Soha ne töltsön vizet a "MAX" jelzés fölé.
- Ne adjon a vízhez több sót, mint amennyit javasoltunk. A több só nem ad erősebb egészségügyi hatást! Erősebb hatás érdekében töltsön több időt a sós párában!
- A túl tömény sóoldat (a javasoltnál több só) alkalmazása nem a hatást fokozza, hanem a készülék hibájához vezet (lerakódik a ventilátoron és akadályozza a forgását).
- Természetes és adalékmentes kősót használjon, például Parajdi vagy Himalájai kősó.
- Ne használjon tengeri sót, jódot vagy másmilyen adalékot tartalmazó sót (az ezekben levő szennyeződések nem jók a tüdőnek)!
- Ha a tartály üres, ne kapcsolja be az eszközt.
- A karbantartási utasítások szerint eljárva, rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy megelőzze a meghibásodását.
- Karbantartás előtt mindig válassza le a tápellátásról.
- Használatot követően a megmaradt vizet a "DRAIN SIDE", azaz a tartály leeresztő oldalán öntse ki, és egy tiszta, száraz ruhával törölje szárazra az eszközt.
- Tartsa távol közvetlen napfénytől, hőforrástól és légkondicionálótól.
- Ne döntse meg az eszközt, mert a víz bekerülhet az aljába és meghibásodást okozhat.
- Egyszerre ne használja 10 óránál hosszabb ideig. Újraindítás előtt várjon 60 percet, hogy elkerülje az ultrahangos cella károsodását.
- Ne töltsön a készülékbe illóolajat, aromaterápiás anyagot. A kémiai illatanyagok, fűszerek vagy szennyeződések hibás működést okoznak.
- Csak csapvizet használjon, ne használjon ásványvizet, szénsavas vizet, Salvus vizet vagy gyógyvizet, mert a készülék károsodásához vezethet.
- Használat közben ne mozgassa az eszközt.
- Nedves kézzel ne érintse a termék egyetlen részét sem.
- Gyermekektől és kisállatoktól tartsa távol.
- A kábel ne keresztezzon haladási útvonalakat és soha ne alkalmazzon erős húzó hatást egyetlen pontján sem.
- Ha égett szagot érez, azonnal válassza le a hálózatról.
- Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót a készülék működése közben.

FIGYELEM!

Ha a készüléket várhatóan hosszabb időn át nem használja (szabadságra megy, elutazik néhány napra), a tartályt ürítse ki és törölje szárazra, mert a tartósan használaton kívüli készülékben maradó és párolgó víz tönkreteheti a készüléket.

Ha az elektromos hálózata nem rendelkezik túlfeszültség védelemmel és nem használ túlfeszültség védett elosztót, akkor vihar, villámlás esetén húzza ki az adaptert a hálózathoz.

Hibaelhárítás

Ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat:

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldási javaslat
Nem kapcsol be – korán kikapcsol	<ul style="list-style-type: none"> • Van elég víz a tartályban? • A tápkábel csatlakoztatása megfelelő? 	<ul style="list-style-type: none"> • Töltsön vizet a tartályba • Válassza le, ellenőrizze a kábeleket, majd csatlakoztassa ismét körültekintően.
Nincs pára, vagy abnormális a pára	<ul style="list-style-type: none"> • Nincs elég víz • Túl sok a víz • Beszennyeződött az ultrahangos cella? • A burkolat és a belső burkolat felhelyezése nem megfelelő? • Az eszköz alján lévő levegő beszívó nyílás valamiért eltömődött? 	<ul style="list-style-type: none"> • Töltsön megfelelő mennyiségű vizet. • A víztartályt sose töltsse a MAX vonal fölé. • Kérjük, ellenőrizze a karbantartási utasításokat az ultrahangos cella megfelelő tisztításához. • Vegye le, majd helyezze vissza megfelelően, hogy a pára képződése akadálytalan legyen. • Tisztítsa meg vagy szabadítsa fel a beszívó nyílást. • A korlátozott légáram hatással van a pára képzésre.
Az eszkből szivárog a víz	<ul style="list-style-type: none"> • A burkolat és a belső burkolat felhelyezése nem megfelelő? • Felborult az eszköz? • Alacsony a hőmérséklet vagy magas a páratartalom? 	<ul style="list-style-type: none"> • Vegye le, majd helyezze vissza megfelelően, hogy a pára képződése akadálytalan legyen. • Kövesse a véletlen kiömlésre vonatkozó utasításokat. • Ilyen körülmények között a pára gyorsan lecsapódik vízcseppek formájában.
Amikor bedugom alul a csatlakozót, akkor szikrázik	Az adaptert már korábban csatlakoztatta a konnektorba és az áram alatt levő kábelt csatlakoztatja másodikként a készülékhez.	Az áram alá helyett kábel csatlakoztatásával mini-zárlatot okoz (A szikrázás ezt jelzi!) és ezzel a (helytelen) csatlakoztatással károsíthatja az elektronikát, akár az első ilyen bedugással tönkretelheti a készüléket. Minden esetben a készülék alján levő csatlakozót dugja be elsőként, csak ezután csatlakoztassa az adaptert a konnektorba.
Áramszünet után (vagy nagyobb vihar után) a készülék nem indul	Az áram ingadozás, a visszatérő áram miatti "tüske" károsíthatja az elektronikát (minden elektromos eszköz érzékeny erre).	Ha a háza, lakása nem rendelkezik hálózati túlfeszültség védelemmel, akkor olyan elosztóból, vagy szünetmentes áramforrásról működtesse a SaltDome-t, amely megvédi a túlfeszültségtől. Ezen felül villámlással kísért viharban érdemes a hálózati adaptert kihúzni.
Hónapokig nem használtam, most újra használni akarom, de nem indul.	A készülék rendszeres használatának abbahagyása után a tartályban víz maradt. A víz párolog, lecsapódik a készülék belsejében és korrodálja az elektromos alkatrészeket.	Ha a készülék használatát -akár csak néhány napra- megszakítja, akkor ürítse ki a vizet, törölje szárazra a tartályt és a fedelet. Így tegye el a készüléket.

Figyelem

A keletkező pára mennyisége és intenzitása változik, de ez nem tekinthető hibának. A pára mennyiségét befolyásoló tényezők közé tartozik a tartályban levő víz mennyisége, a helyiség páratartalma és hőmérséklete, továbbá a levegő áramlása.

Ha nincs víz a tartályban, a PÁRA gomb megnyomásával a készülék 3 alkalommal "csipog", hogy emlékeztesse Önt a víz hozzáadására. A készülék víz nélkül nem fog működni.

Abban az esetben, ha a készülék használat közben felborul, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a hibás működés elkerülése érdekében.

- Húzza ki a készüléket a hálózathoz és vegye le a fedelet.
- Öntse ki a víztartályból a maradék vizet.
- Óvatosan rázza meg a készüléket, hogy az esetleg a készülékházban lévő víz lefolyjon, majd hagyja száradni legalább 24 órán keresztül.

Garancia és Garancia érvényesítése

A SaltDome készülékre a vásárlástól számított 12 hónap, a hálózati adapterre 6 hónap garanciát biztosítunk.

A garancia érvényesítése vagy garanciaidőn túl a javítás szervizben történhet, ezért juttassa a készüléket az alábbi címre.

Cím: Scart Kft - Szerviz. 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

A csomagba mindig tegye bele:

- készülék
- tápegység
- távirányító (ha ezzel szokta használni)
- hiba rövid leírása
- számlamásolat (de elegendő a számlaszám vagy rendelésszám megadása is)
- visszaküldési cím
- telefonszám (kérdés esetén el tudjuk érni)
- email cím (kérdés esetén el tudjuk érni)
- ha a készülék már nem garanciális, akkor jelezze, mindenképpen kéri-e a javítást vagy ajánlatot kér a várható költségekről.

Ügyfélszolgálat:

Scart Kft.

2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Tel.: +36 53 200108

info@medimarket.hu • www.medimarket.hu