




REF: E-SF150

**1 Újrafelhasználható elektródabetét az elektroterápiás egységhez**

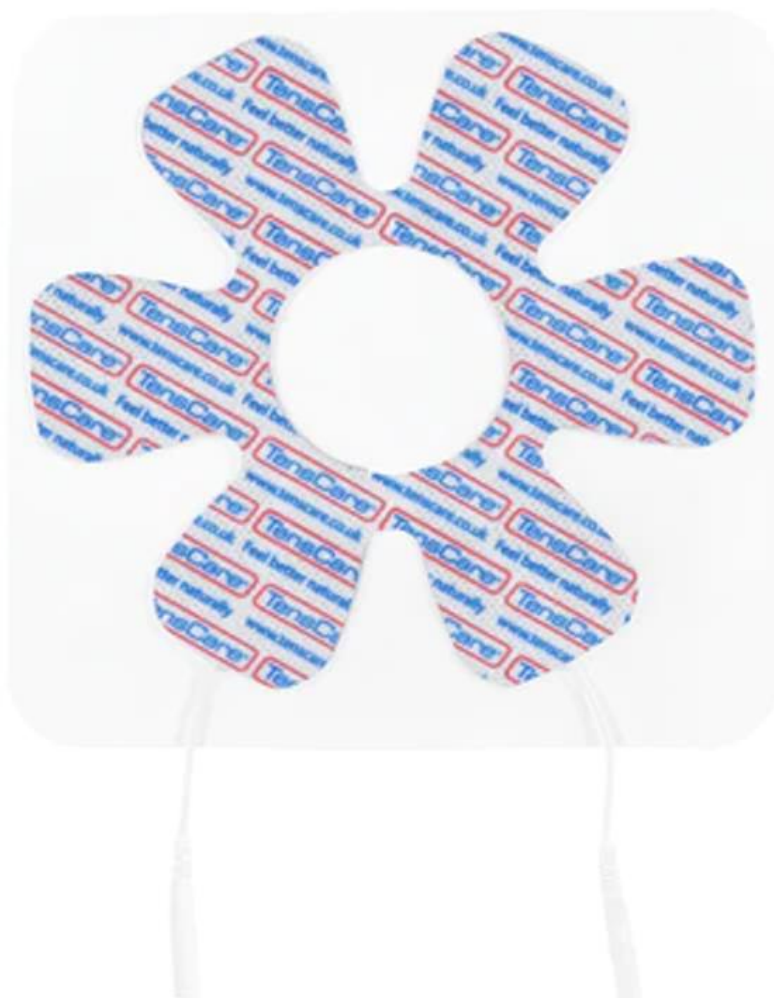

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL

**TensCare™**

## Használati utasítás

Használja TENS készüléssel. Használja ezt az elektródabetétet TENS-szel a fájdalomcsillapításhoz általában használt beállításokkal.



- 1) Használat előtt győződjön meg róla, hogy bőre tiszta és száraz.

**Ne helyezze az elektródapárnát** olyan bőrre, amely nem rendelkezik normál érzéssel, vagy sérült bőrre.

- 2) Nyomja a vezetékcsatlakozások végeit erősen az elektródapárna csatlakozásába.

**Megjegyzés:** A közös elektródapárna TENS-elektrodapárként működik. Csatlakoztassa mindkét pigtail vezeték ugyanahhoz a készülékből érkező TENS vezetékhez.

- 3) Húzza le az elektródapárnát a műanyag védőburkolatáról úgy, hogy megfogja és felemeli a párna egyik sarkát, majd húzza.

**Ne húzza meg a padsort.**

**Mindig ellenőrizze**, hogy a készülék ki van-e **kapcsolva**, mielőtt felhelyezi vagy eltávolítja az elektródabetétet.

- 4) Vigye fel az elektródapárna ragasztó oldalát a fájdalmas terület köré, és szorosan nyomja a bőrhöz.

- 5) Helyezze fel az elektródapárnát:
  - a. Az ízületet elválasztó vonallal
  - b. Az ízület mentén húzott választóvonallal

- 6) Távolítsa el az elektródabetétet a bőréről úgy, hogy megfogja magát a betétet, és óvatosan húzza.

- 7) Használat után mindig cserélje vissza az elektródabetétet a műanyag bélésre, és helyezze vissza az újrazárható műanyag zacskóba.

## Tanácsadás

- A mellékelt elektródapárna újrafelhasználható, de csak egy betegnél használható.
- A mellékelt elektródabetét latexmentes. A ragasztó egy lehúzható, vízalapú hidrogél.
- A legjobb vezetőképesség elérése érdekében az elektródapárnán keresztül mindig győződjön meg arról, hogy jó állapotban van és ragadós.
- Cserélje ki az elektródapárnát, ha az elveszíti ragadását vagy kiszárad.
- Nagyon meleg időben az elektródapárna gélje megpuhulhat.

## Tárolási élettartam

Az elektródabetétnek a bőr állapotától és a páratartalomtól függően 12-20 alkalmazásig kell tartania.

Egy bontatlan csomag elektródabetét tárolási ideje 2 év. Ezt befolyásolhatja a nagyon magas hőmérséklet vagy a nagyon alacsony páratartalom.

## Figyelmeztetések

Ne hagyjon figyelmen kívül semmilyen allergiás reakciót az elektródabetétekre: Ha bőrirritáció alakul ki, hagyja abba a készülék használatát, mivel a felhasználók egy kis részénél előfordulhat, hogy a géltre nemkívánatos reakció lép fel.

Csak az EN 60601-1 és EN60601-2-10 szerint jóváhagyott idegstimulátorokkal való használatra.

**Fontos:** Tartsa be az összes Ellenjavallatot, Óvintézkedést és Figyelmeztetést, amely az elektródákkal együtt használt készülékhez tartozik.

## TensCare Ltd.

PainAway House,  
9 Blenheim Road, Longmead Business Park, Epsom, Surrey  
KT19 9BE, UK